




## Manual de Funcionamiento

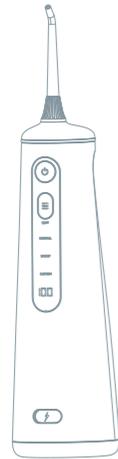

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Toda la información en esta sección se proporciona para instruirle sobre el funcionamiento correcto y seguro de este dispositivo, de modo que pueda evitar lesiones a usted mismo y a otros, así como daños a la propiedad.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

#### Peligros

- Los niños pequeños, los bebés y las personas que no puedan operar no deben usar este electrodoméstico. Por favor, manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Nunca altere el electrodoméstico. Además, no intente desmontarlo o repararlo.
- No coloque ni guarde el producto donde pueda caerse o ser arrastrado hacia la bañera o el fregadero.
- No intente alcanzar el producto que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- No utilice el producto mientras se baña.

#### Advertencias

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprenden los riesgos involucrados.
- Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- El electrodoméstico solo debe ser utilizado con la unidad de suministro de energía proporcionada con el electrodoméstico.


- La batería debe ser retirada del electrodoméstico antes de ser desechado.
- El electrodoméstico debe ser desconectado de la red eléctrica al retirar la batería.
- La batería debe ser desechada de manera segura.
- En cuanto a cómo retirar la batería, por favor consulte "Desecho".
- No llene el tanque con agua más caliente de 40 °C.
- Si el cable flexible externo o el cordón de este transformador está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio técnico o una persona calificada similar para evitar un peligro.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Por favor, no lo use si ha perdido la boquilla.
- El electrodoméstico solo debe ser alimentado con una tensión extra baja de seguridad que provenga de una unidad de suministro de energía (como un adaptador) con una fuente de alimentación de clase 1 (PS1, que no exceda los 15 W). La salida de la unidad de suministro debe corresponder a la marca en el electrodoméstico.

#### Nota:

Puede haber líquido restante dentro del electrodoméstico principal antes de usarlo (tanque, tubo de succión de agua, etc.), esto es el agua destilada restante que se utilizó para la prueba de rendimiento (flujo de agua), por lo que no hay preocupaciones de salud.

### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


### CONFIGURACIÓN:

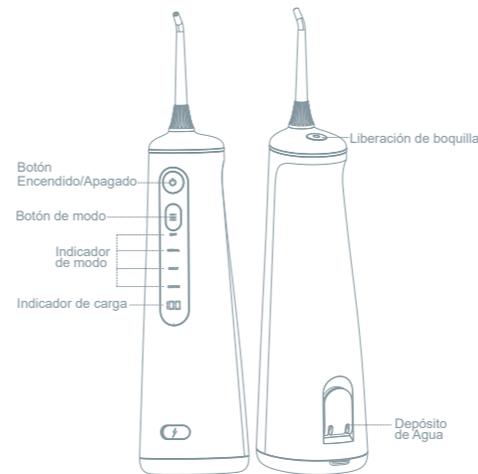

### CÓMO USAR

#### Cargando el dispositivo (Fig. 1/2)

1. Abra la tapa del enchufe de carga hacia abajo e inserte el enchufe del adaptador firmemente en el enchufe de carga (asegúrese de que no quede líquido en el interior del enchufe antes de insertar el enchufe de carga)
2. Inserte el adaptador de carga firmemente en el enchufe de corriente.
3. El indicador "Pantalla digital" titila cuando el dispositivo está cargando y se mantendrá encendido de manera constante después de que el dispositivo esté completamente cargado.
4. Vuelva a colocar la tapa en el enchufe de carga después de finalizar la carga.

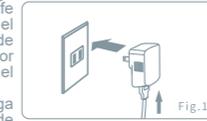

#### Nota:

Si el indicador "Pantalla digital" parpadea durante o después de un riego, eso significa que es necesario recargar la batería. Una recarga completa tardará unas 4 horas.

#### No encienda el dispositivo antes de colocar la boquilla en su boca.

1. Abra la tapa del tanque de agua (Fig. 3).
2. Coloque la boquilla en la unidad (Fig. 4).



3. Llene el tanque de agua con agua que no exceda los 40 °C, luego cierre la tapa del tanque de agua (Fig. 5).
4. Presione el botón "Modo" para seleccionar el modo deseado. Durante la irrigación, puede cambiar el modo de funcionamiento.
- Soft:** Para una limpieza suave de encías sensibles.
- Normal:** Para una limpieza normal.
- Pulse:** para limpiar y masajear las encías.
- Custom:** Presione el botón de modo con 3s (no soltar), el LED parpadea.

La presión del agua aumenta un nivel (nivel 1~8) con cada pulsación, al soltar el botón de modo, se seleccionará la presión de agua relacionada.

6. Sostenga la unidad en posición vertical con la punta de la boquilla apuntando hacia sus dientes.
7. Mantenga la boca ligeramente abierta para que el agua pueda fluir hacia afuera.
8. Presione el botón "Encendido / Apagado" para comenzar a irrigar (Fig. 6).

1. Dirigir el flujo de agua a un ángulo de 90 grados hacia los dientes y las encías.
2. Dirigir lentamente el chorro de agua a lo largo de los dientes.

3. Dirigiendo el chorro de agua a lo largo de la línea de las encías con la punta de la boquilla a un ángulo de 90 grados con el tejido de las encías.

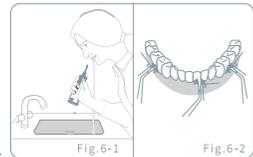


Fig. 6-2

4. Limpiando entre los dientes y alrededor de cualquier aparato dental, coronas o trabajo de puentes minuciosamente.

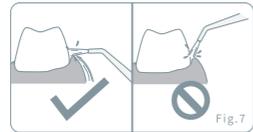


Fig. 7

9. Presione la tecla "On / Off" y luego presione el botón de liberación de la boquilla para reemplazar otra boquilla cuando sea necesario.

10. Una vez que la irrigación esté completa, presione nuevamente la tecla "On / Off" para apagar el dispositivo

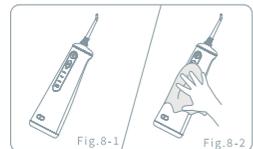


Fig. 8-2

#### Después de usar el aparato (Figura 8)

1. Abra la tapa del tanque de agua y deséche el agua del tanque.
2. Presione la tecla "Encendido/Apagado" para encender la unidad y drenar el agua dentro del aparato.
3. Presione la tecla "Encendido/Apagado" nuevamente para apagar la unidad y cierre la tapa del tanque de agua.
4. Limpie el dispositivo con un paño seco.

#### Nota:

Para evitar la propagación de bacterias, asegúrese de que no quede agua dentro del aparato. Si no va a utilizar este electrodoméstico durante mucho tiempo, asegúrese de limpiar y secar el aparato antes de guardarlo.

### MANTENIMIENTO

Utilice solo agua o un agente de limpieza neutro para limpiar el dispositivo. Nunca utilice agentes cáusticos o abrasivos (por ejemplo, vinagre o removedores de cal), ya que pueden dañar el dispositivo. No lo lave usando agua caliente de más de 50 °C. Mantenga el dispositivo alejado de áreas de alta temperatura y evite la luz solar directa

#### Unidad Principal:

1. Retire la suciedad limpiando con un paño con jabón líquido y limpie con un paño seco.
2. No sumerja la unidad principal en agua para limpiarla.
3. Secar después de lavar con agua.

#### Tapa Tanque de Agua

Limpie la suciedad y la suciedad con un paño.

#### Boquilla

1. Lavar con agua y limpiar con un paño suave.
2. Reemplace la boquilla cada 6 meses.

#### Tubo de aspiración de agua

1. Lavar con agua y limpiar con un paño suave.
2. No doble, tire ni fuerza el tubo de succión de agua.

#### Tanque

1. Lavar con agua y limpiar con un paño suave.
2. Seque el tanque cuando no lo utilice durante un período prolongado.

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución
No funciona	Acabas de comprar el producto o ha estado sin usar durante más de 3 meses.	Carga la unidad durante al menos 4 horas.
Solo funciona durante unos pocos minutos, incluso después de completar la carga	La batería ha alcanzado el final de su ciclo de vida.	Contacta al servicio técnico en el centro de soporte
	El tiempo de carga fue insuficiente.	Carga la unidad durante al menos 4 horas.
La presión del agua es muy baja.	Hay suciedad atrapada en la boquilla.	Reemplace la boquilla
	La boquilla está deformada.	Reemplace la boquilla
El agua no sale	Hay suciedad atrapada en el filtro.	Limpia el filtro
	El tanque esta vacío	Llenar el tanque
El agua no sale	El aparato está demasiado inclinado mientras está en uso.	Usar el aparato en estado vertical.
	Acabas de comprar el producto o ha estado sin usar por un período	Saque la boquilla y luego enjuague el orificio de la boquilla en el cuerpo.

### DESECHO

La batería recargable dentro de su electrodoméstico es fácil de quitar para reciclar. Al final de la vida útil del producto y antes de desecharlo, por favor retire la batería recargable del mango siguiendo las instrucciones a continuación. Durante la siguiente operación, asegúrese de proteger sus ojos, manos, dedos y la superficie en la que trabaja.

1. Retire los tornillos de la tapa y los tornillos en la parte inferior del mango. (Fig. 9).
2. Utilice un objeto duro y afilado para abrir la cubierta superior. (Fig. 10).
3. Abra la carcasa y saque los componentes centrales (Fig. 11).
4. Corte la línea de la batería y extraiga las baterías del interior (Fig. 12).



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12

Si tiene preguntas sobre reciclaje, comuníquese con su oficina local de gestión de residuos.



ISO 9001 & ISO 13485 Certified Manufacturer



Made in PRC