


GIO-450PINK

GIO-450BLUE


innoGIO

PASOS DE USO


PRIMER USO

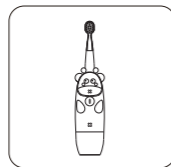


1. Sacar el cepillo de dientes.

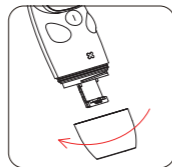

2. Girar la tapa inferior en sentido contrario a las agujas del reloj y abra la tapa inferior.

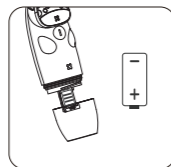


3. Sacar la batería y la lámina protectora, y sustituya la batería (positivo hacia abajo).

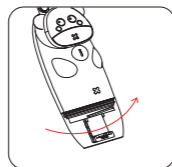


4. Volver a colocar la tapa inferior y atornillela en el sentido de las agujas del reloj.


USO

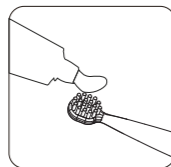


1. Exprimir la pasta de dientes en el cepillo.

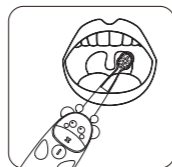

2. Poner el cepillo de dientes en la boca.

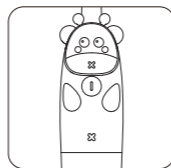

3. Para seleccionar una marcha adecuada, pulse suavemente el interruptor. El temporizador realiza una cuenta atrás de 2 minutos de cepillado. También hay un recordatorio para cambiar la zona de cepillado cada 30 segundos. Mantenga pulsado durante 3s para apagarlo.

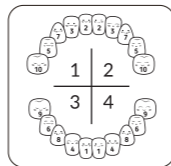

4. Cepíllate siguiendo las recomendaciones de los dentistas: cada zona dental debe cepillarse durante 30s para tener los dientes más limpios



5. Enjuágate la boca con agua y limpie el cepillo con agua después de cepillarse los dientes.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre: InnoGIO GIOgiraffe Cepillo de dientes eléctrico con siete colores
- Modelo: GIO-450ROSA / GIO-450AZUL
- Fuente de alimentación: 1x batería AAA (no incluye la batería)
- Tamaño del producto: 160,5 x 35 x 35 mm
- Tensión nominal: 1,5 V
- Potencia nominal: 0,51 W
- Corriente nominal: 0,34 A
- Grado de impermeabilidad: IPX7

FUNCIONES

CUATRO MARCHAS

- Primera marcha Modo de siete colores: encender el dispositivo y mostrará diferentes colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y morado, el intervalo de cambio de color es de 0,5 sin vibración, el tiempo total de cepillado es de 1 minuto. Este engranaje se recomienda para los niños que no toleran las vibraciones.
- Segunda marcha Modo de cepillado suave: la luz permanece inalterada durante 2 minutos. Esta marcha está recomendada para niños de 2 a 5 años.
- Tercera marcha Modo de cepillado estándar: la luz cambia al siguiente color después de la segunda marcha, el tiempo total de cepillado es de 2 minutos. Esta marcha está recomendada para niños de 5 a 8 años.
- Modo de cepillado fuerte de la cuarta marcha: la luz cambia al siguiente color después de la tercera marcha, el tiempo total de cepillado es de 2 minutos. Esta marcha está recomendada para niños de 8 a 12 años.

TIEMPO DOS-MINUTOS

Para los modos de segunda, tercera y cuarta marcha, después de 30s, 60s y 90s, las luces parpadean una, dos y tres veces respectivamente, y el motor se para una, dos y tres veces, respectivamente. El tiempo de parpadeo y parada es de 0,5 s para recordar al usuario que debe cambiar la zona de cepillado. 120 s, la luz parpadea dos veces, y luego se apagará.

FUNCIÓN DE MEMORIA

El aparato puede entrar en el modo de memoria en cada marcha. Manténelo pulsado para que se apague o se desconecte automáticamente. La próxima vez que encienda el dispositivo, entrará automáticamente en la última utilizada.

CARACTERÍSTICAS



Cepillo DuPont

El cepillo está hecho de material DuPont, con un extremo redondeado, que es fuerte y resistente al desgaste. Protege las encías del bebé a la vez que limpia los dientes con eficacia.



Luces de colores

El cepillo de dientes tiene un simpático diseño de animal con un brillo de colores – a los niños les encantará, mientras aprenden el buen hábito de cepillarse los dientes.



Diseño de funda de silicona

El diseño único y creativo de la silicona es tridimensional, proporcionando una sensación más cómoda y suave. A los niños les encantará la sensación de cepillarse los dientes.



Impermeabilidad IPX7

El grado de impermeabilidad del dispositivo es IPX7, lo que significa que el cepillo de dientes puede lavarse por completo, e incluso utilizarse durante el baño.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Cepillo de dientes
- Cabezal de cepillo reemplazable 2 piezas
- Instrucciones

PRECAUCIONES

1. La temperatura normal de trabajo es de 0-50°C.
2. Si el dispositivo no se utiliza durante mucho tiempo, por favor, retire la batería, y guarde el cepillo de dientes en la caja, en un lugar fresco.
3. Deje secar el cabezal del cepillo de dientes después de cepillarse los dientes.
4. Cuando el producto está en uso, alcanza su máxima potencia de salida. El producto no debe funcionar continuamente durante mucho tiempo. Generalmente, cada tiempo de uso no debe superar los 10 minutos.
5. Nunca camine o corra cuando utilice el cepillo.
6. Asegúrese de que los niños estén siempre supervisados por un adulto mientras se cepillan los dientes.

GIO giraffe

CEPILLO DE DIENTES ELÉCTRICO PARA NIÑOS CON SIETE COLORES

innoGIO

Producido en China para INNOGIO sp. z o.o. Calle Ostródzka 74H, 03-289 Varsovia, Polonia www.innogio.es

Fecha de emisión: 03/2022

@Innogio Spain @innogio.es