

Dreame lézeres szőrtelenítő

Használati útmutató

Fontos tudnivalók

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi információkat, majd kövesse a használati útmutatóban szereplő utasításokat. Ezek a tudnivalók a termék megfelelő és biztonságos működésének biztosítása érdekében kerültek megfogalmazásra, hogy elkerüljük a személyi sérüléseket vagy a vagyoni károkat. Kérjük, tartsa be őket. További információkért vagy személyre szabott tanácsért forduljon a helyi forgalmazóhoz. Ha továbbra is kétségei vannak a termékkel kapcsolatban, forduljon bőrgyógyászhoz vagy háziorvoshoz.

Ellenjavallatok

18 év alattiak számára nem alkalmas.

Terhes, szoptató vagy menstruáló nők számára nem alkalmazható.

Tetoválások vagy állandó hegek esetén nem alkalmazható.

Nem alkalmazható olyan személyeknél, akiknek a bőrén kiterjedt sötét foltok vannak, mint például szemölcsök, anyajegyek, anyajegyek vagy szemölcsök.

Nem alkalmazható ekcémás, nyílt bőrfekélyes vagy nyílt bőrsebes személyeknél.

Nem alkalmazható veleszületett bőrbetegségben szenvedő személyeknél.

Nem alkalmazható olyan személyeknél, akiket alfa-hidroxisavakkal (AHA), béta-hidroxisavakkal (BHA), Retin-A-val, borkőssavval, szalicilsavval vagy azelainsavval kezeltek vagy jelenleg is kezelik.

Nem cukorbetegek számára.

Nem alkalmazható izotretinoin szedő személyeknél.

Nem alkalmazható olyan személyeknél, akik az elmúlt 3 hónapban szteroid kezelésben részesültek.

Nem alkalmazható epilepsziás betegeknek.

Figyelmeztetések

- Szem: a fényimpulzusok csak akkor aktívak, ha a kezelőablak teljes érintkezésben van a bőrrel. A készülék használata során azonban ne nézzen a kezelőablakba. Ez szemkárosodást okozhat.

- Szem: NE HASZNÁLJA EZT A KÉSZÜLÉKET A SZEMEN VAGY AZON KÖZELÉBEN. NE HASZNÁLJA EZT A KÉSZÜLÉKET SZEMPILLÁK VAGY SZEMÖLDÖK ELTÁVOLÍTÁSÁRA. EZ TRWAŁE SZEMKÁROSODÁST OKOZHAT.

- Szem: AJÁNLOTT a szem elfordítása a készüléktől, amikor az a bőrre irányul. A védőszemüveg viselését is javasoljuk minden alkalommal, amikor használja, és ez a készülék általában recept nélkül kapható, valamint a "Személyzet védőfelszerelése a 21CFR 892.6500 szerint, procód: IWS" besorolásban; a védőszemüveg kiválasztási kritériumai a következők: #1) képesek hatékonyan védeni az intenzív, 510 nm hullámhosszúságú fénytől (F osztályú védőszemüveg); #2) és fényáteresztő képességük nem haladhatja meg a + 10%-ot; #3) a védőszemüveget licencelt gyártóktól kell beszerezni.

- A lézeres vagy intenzív pulzáló fényforrásos szőrtelenítés egyes embereknél fokozott szőrnövekedést okozhat. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a legnagyobb kockázatnak a mediterrán, közel-keleti és dél-ázsiai származású nők vannak kitéve, akiknek az arcán és a nyakán végeznek kezelést. Ennek a csoportnak fokozott óvatossággal kell eljárnia.

- A készüléket tartsa távol gyermekektől.

- Ne használja tetoválásokon vagy permanent sminken, sötétbarna vagy fekete foltokon (például nagy szeplők, anyajegyek vagy szemölcsök), a mellbimbókon, a nemi szerveken és az anus körül.

- Használat előtt kerülje a bőr közvetlen napsugárzásnak való kitettségét.

- Ha olyan tünetek jelentkeznek, mint az égés és a hólyagok, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

- HA A KÉSZÜLÉK VÍZBE KERÜL, NE ÉRINTSE MEG KEZEKKEL. AZONNAL HÚZZA KI A TÁPEGYSÉGET. NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET FÜRDŐSZOBÁBAN, MOSDÓK KÖZELÉBEN, KÁDBAN VAGY ZUHANYZÓBAN.

- Tartsa távol a készüléket a víztől vagy folyadékoktól! Ne használja kádban, zuhanyzóban, mosdók közelében vagy más víztartályok közelében.

- Ne használja, ha a készülék vagy annak tartozékai (például a tápkábel, adapter) sérültek. A tápkábelt tartsa távol a forró felületektől.

- Ne használjon más alkatrészeket, mint amelyekkel a Beauty Every Moment felszerelte.

- A Beauty Every Moment által felhatalmazott személyzet kivételével senki más ne próbálja szétszerelni a készüléket.

Óvintézkedések

- A készülék használata előtt borotválja le és tisztítsa meg a kívánt bőrfelületet.

- Ne depilálja ugyanazt a bőrfelületet többször egy depilálási ülésen belül.

- Soha ne használj gyúlékony folyadékokat, például alkoholt (beleértve a parfümöt, fertőtlenítőszeret vagy más alkohol tartalmú alkalmazásokat) vagy acetont a bőr tisztításához használat előtt.

- A kezelőablak felülete minden kezelés után maradék hőmérsékleten marad, ne tisztítsa az ablakot közvetlenül ebben az időben, hogy elkerülje a termék működésére gyakorolt hatást. Várjon, amíg az ablak hőmérséklete le nem hűl, majd tisztítsa meg a követelményeknek megfelelően.

- Amikor a termék folyamatos üzemmódban működik, a használt rész (kezelőablak) hőmérséklete emelkedni fog, de nem több, mint 43 Celsius fok. Az operátor szabályozhatja a hőmérsékletet a kontakt idő korlátozásával, amelyet ajánlott, hogy 30 perc legyen egy ülésen, és várjon 15 percet, amíg a készülék lehűl, mielőtt folytatná a használatát.

- A készüléket nem szabad szervizelni vagy karbantartani PACIENS használat közben. A PACIENS a szándékolt ÜZEMELTETŐ.

- A készüléket kizárólag egyetlen beteg számára tervezték.
- Az ügyfelek minden kezelés során enyhe melegséget fognak érezni, ami normális jelenség; és általában 24 órán belül elmúlik. Ha ez az érzés 24 órán belül nem múlik el, hagyja abba a termék használatát, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal vagy orvosával.

A készülék használatával járó kockázatok

Az otthoni használatra szánt IPL szőrtelenítő készülék használatával kapcsolatos mellékhatások és szövődmények ritkák. Minden kozmetikai kezelés, beleértve az otthoni használatra szántakat is, bizonyos mértékű kockázattal jár. Ezért fontos megérteni és elfogadni a kockázatokat és a szövődményeket, amelyek az otthoni használatra szánt intenzív pulzáló fényes szőrtelenítő rendszerek használatával kapcsolatban felmerülhetnek.

Ha a következő állapotok bármelyike megjelenik és 24 óránál tovább tart, forduljon orvoshoz:

Mellékhatás	A negatív hatások valószínűsége
Kismértékű bőrirritáció	Kismértékű
Bőrpír	Kismértékű
Bőrzékenység	Kismértékű
Bőrsérülések és égések	Ritka
Hegek	Ritka
Pigmentációváltozás	Ritka
Túlzott duzzanat	Ritka

Mellékhatás	Valószínűsége
Fertőzés	Kedvezőtlen hatása
Zúzódások	Jelentéktelen

Bevezetés


Célja:

Az otthoni használatra szánt IPL szőrtelenítő készülék egy recept nélkül kapható eszköz, amelyet a test és/vagy az arc nem kívánt szőrszálainak eltávolítására terveztek.

Csomag tartalma

IPL főegység x1
Hálózati adapter 1
Hálózati kábel 1
Használati útmutató x1
Borotva x1
Védőszemüveg x1

Termékleírás

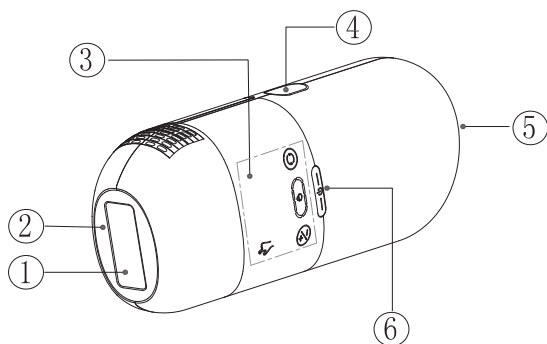

1 Kezelőablak panel

2 Bőrzérzékelő

3 Kijelző


4 Villanófény gomb

5 Egyenáramú csatlakozó

6 Bekapcsoló gomb/képernyő zároló gomb/készültségi lámpa/készültségi jelző lámpa

Figyelem: A lámpabetét nem cserélhető alkatrész, és főként a kezelési ablak paneljából és a bőrszenzorból áll, a bőrszenzor pedig arra szolgál, hogy azonosítsa , megfelelő-e a bőrrel való érintkezés.

Kijelző

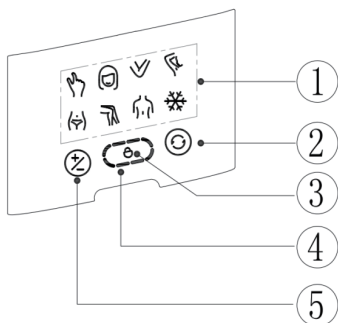

- 1 Mód ikonok
- 2 Mód/automatikus villanás gomb ikon
- 3 Kijelző zár ikon
- 4 Feldolgozási szint
- 5 Szint gomb

MEGJEGYZÉSEK:

- 1) Öt ikon, két érintőgomb áll rendelkezésre, és a készülék bekapcsolásakor megvilágosodik a hónalj terület ikonja, a mód gomb ikonja, a szint gomb és a kezelési szint.
- 2) A kijelzősáv nyolc üzemmód ikont tartalmaz (ujj, arc, kar, hónalj, bikinivonal, láb, felsőtest és jéghideg ikon), amelyek a gyakran használt testrészeket jelképezik, amelyeket a felhasználónak át kell kapcsolnia erre az ikonra a termék használata előtt, amikor a terméket ezekre a testrészekre helyezi. A testrészek ikonjai a következő sorrendben kapcsolhatók át (ujj terület ikon > arc terület ikon > kar terület ikon > hónalj terület ikon > bikinivonal terület ikon > láb terület ikon > felsőtest terület ikon > jéghideg ikon), a mód gomb rövid megnyomásával. Például, ha el szeretné távolítani a nem kívánt szőrszálakat a bikinivonaltól, akkor azt javasoljuk, hogy a mód gomb rövid megnyomásával kapcsoljon át a bikinivonal terület ikonra.
- 3) Az alábbiakban a kijelzősávhoz tartozó alkatrészek ikonjai szerepelnek sorrendben:



- 1 Ujj terület ikon
- 2 Arc terület ikon
- 3 Kar terület ikon
- 4 Hónalj terület ikon
- 5 Bikiniterület ikon
- 6 Láb terület ikon
- 7 Felsőtest terület ikon
- 8 Jég hűtés ikon

4) A villanófény gomb lenyomva tartása (folyamatos nyomás) esetén a készülék automatikus világítás módba kapcsol (GLIDE módszer), és a képernyőn villogni kezd az automatikus villanófény ikon.

Műszaki adatok

Modell: D-1186

Méretetek: 175*64*39mm

Súly: 295g

Védelmi típus: BF típus, II. osztály

Védelmi szint: IPX0

Felhasznált alkatrészek: Lámpapatron kezelőablaka

Kimeneti specifikáció

Fénytípus: Intenzív pulzáló fény (IPL)

Fényhullámhossz: 550 ~ 1100nm

Impulzus időtartama: 5~12ms +/-20%

Kezelőablak foltmérete: 3,0 cm²

Feldolgozási szint: 1-től 8-ig

Energiasűrűség: 2,0~4,3J/cm² +/-20%

Tápellátási specifikáció

Tápellátás: Külső tápegységgel működik (Bemenet: 100-240V 50/60Hz 1.5A Max;

Kimenet: DC24V 2.5A)

Használati specifikáció

Várható élettartam: 510 000 lövés

Üzemi környezet: Hőmérséklet: 15~35°C; Páratartalom: 30%~75% relatív páratartalom; Légnyomás: 86~106kPa

Tárolási környezet: Hőmérséklet: 0~40°C; Páratartalom: 25%~75%RH; Légnyomás: 86~106kPa

Hogyan működik

Hogyan működik az IPL?

Az otthoni használatra szánt IPL szőrtelenítő készülék egy pulzáló fényrendszer, amely 550 és 1100 nm közötti hullámhosszú intenzív pulzáló fényt (IPL) bocsát ki. A készülék a szelektív fototermodízis elvén működik. Ez azt jelenti, hogy a hőkárosodást a célzott kromoforok okozzák a megfelelő hullámhosszú fényimpulzusok segítségével, amelyek meghaladják a kromoforok hőrelaxációs idejét, de a normál bőrt megkímélik azáltal, hogy az impulzus szélességét a bőr hőrelaxációs ideje alatt tartják.

Használati ütemterv

Az optimális eredmény elérése érdekében a házi IPL szőrtelenítő készüléket hetente egyszer kell használni 12 héten keresztül, hogy minden szőrtüszőt kezeljen. A kezdeti kezelési szakasz (12 heti kezelés) után a hatás fenntartása érdekében javasoljuk a készülék havonta vagy szükség szerint történő használatát.

Hogyan kell használni

Alkalmazási területek

Ajánlott kezelési terület

A készülék alkalmas a test nem kívánt szőrszálainak eltávolítására, többek között kis területeken, mint például a hónalj és az áll alatti arc- szőrzet, valamint nagy területeken, mint például a lábak.

ALKALMAZÁS MEGENGEDETT BŐRTÍPUSOKON

A készüléket kizárólag a Fitzpatrick I-V bőrtípusokon szabad használni.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT válassza ki bőrszínét a Fitzpatrick Foto-tipizálási Skála alapján, amelyet a Harvard Medical School bőrgyógyásza, Dr. Thomas Fitzpatrick dolgozott ki, hogy osztályozza az egyén bőrszínét és a napfény iránti toleranciáját. A skála hat bőrszín szinttel rendelkezik.

Kérjük, AZONOSÍTSA bőrszínét és ellenőrizze az alábbi diagramot:

Biztonsági szint	Alkalmas	Alkalmas	Alkalmas	Alkalmas	Alkalmas (óvatosan)	Nem alkalmas
Bőrtípus / szín	I. típus Fehér bőr	II. típus Világos bőr	III. típus Krémés fehér bőr	IV. típus Közepes barna bőr	V. típus Sötétbarna bőr	VI. típus Mélyen pigmentált, sötétbarna -tól leg sötétebb barnán keresztül fekete bőr
Példa						

MEGJEGYZÉSEK:

- Válasszon kényelmes szintet a bőr toleranciája alapján, és fokozatosan növelje az 1-től 5-ig terjedő szintet. Ha a szint nem megfelelő, vagy reakció lép fel, a szint fokozatosan növelhető.
- A bőrszín változhat, például a napbarnítás miatt: sötétebb lehet, mint a korábbi kezelés során. Ezért fontos, hogy ellenőrizd a beállításokat, amelyeket minden kezelés előtt használni szeretnél.

Tapaszteszt

A kezelés megkezdése előtt ismerkedj meg a BŐRTÍPUSOK táblázattal. Végezz tapasztesztet egy kis területen 24 órával korábban, hogy ellenőrizd, nem jelentkezik-e nem kívánt bőreakció.

A TESZT VÉGZÉSE

- Válassz ki egy kis területet a karodon. Végezd el a tapasztesztet lassan, alacsony energiaszinttől a magasabb energiaszint felé, a bőr toleranciájának megfelelően (1 ~ 2 lövés). Ha bármilyen duzzanat, égés, szőrtüsző változás, fájdalom vagy egyéb nem megfelelő tünet jelentkezik, ne használd ezt az eszközt, amíg nem konzultáltál orvossal.
- Ha 24 óra elteltével nem jelentkezik semmilyen bőrreakció, de a kezelés során intenzív hőt érzel, akkor az utolsó alacsonyabb szint a legmegfelelőbb energiamennyiség a bőrtípusodhoz.

Használati lépések

Előkészület:

- 1) A Fitzpatrick fototípus skála alapján határozd meg, hogy a bőrszíned megfelelő-e.
- 2) Használat előtt győződj meg arról, hogy a bőröd jó állapotban van, nincsenek rajta sérülések vagy sebek; valamint arról, hogy a bőröd borotvált, tiszta és száraz (mentes mindenféle maradványtól, mint például por, krém, smink, izzadásgátló vagy dezodor).

Az eszköz konfigurálása:

1) Vegye ki a háztartási IPL szőrtelenítő eszközt és tartozékait a dobozból.

2) A kezelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz tiszta, száraz és sértetlen.


A kezelőablakot minden használat előtt és után meg kell tisztítani a fertőzés kockázatának csökkentése és a szőrszálak és/vagy por megjelenésének megakadályozása érdekében. A kezelőablak tisztításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. lépés Tiszta vattakorongot vagy kozmetikai vattakorongot használjon 70%-os izopropil-alkohollal a kezelőablak tisztításához. Várjon 1 ~ 5 percet.

2. lépés: Hagyd a készüléket megszáradni. FIGYELEM: NE HASZNÁLD A KÉSZÜLÉKET, AMÍG AZ ALKOHOL TELJESEN EL NEM PÁROL.

3. lépés: Vizsgáld meg vizuálisan a készüléket. Ha látható szennyeződés marad, ismételd meg az 1-3. lépést.

3) Csatlakoztasd a hálózati kábelt a hálózati adapterhez, csatlakoztasd a hálózati dugót a konnektorhoz, a kábelt pedig a készülék DC-aljzatához (lásd a 1. ábrát), a készülék jelzőfénye fehér színben fog világítani.

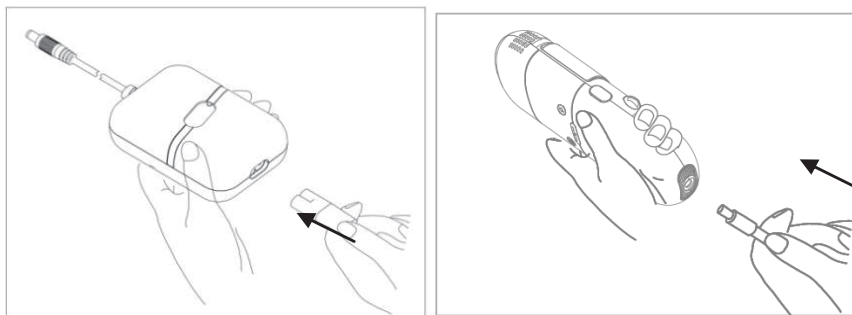


Az otthoni használatra szánt IPL szőrtelenítő készülék készenléti állapotban van, és készen áll a használatra.

FIGYELEM(y):


- Az otthoni használatra szánt IPL szőrtelenítő készüléket asztalra vagy konnektor közelébe kell helyezni. Távolítsa el minden folyadékot a területről.

4) Nyomja meg a bekapcsoló gombot 2 másodpercig a készülék bekapcsolásához, a ventilátor aktiválódik és hangot ad; a jelzőfény továbbra is fehér színben világít, a hideg kompressziós funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva, a képernyő megvilágít és a megfelelő szimbólumok jelennek meg: a kezelési szintek és a hónalj ikon, a mód gomb és a szint gomb.

A jelzőfény
fehér színben világít

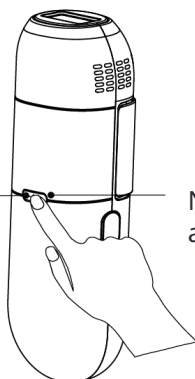

Nyomja meg a bekapcsoló gombot
a készülék bekapcsolásához.

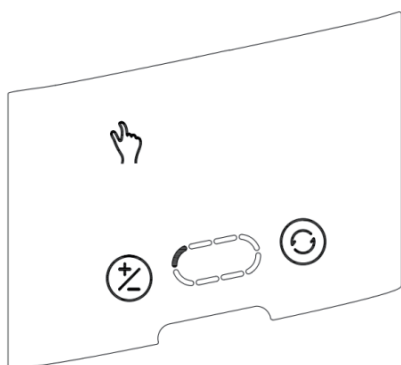

1. szint



2. szint



3. szint



4. szint



5. szint



6. szint



7. szint




8. szint

Figyelem: a hideg kompresszor funkciónak nincs más orvosi terápiás hatása, és csak a bőr hőmérsékletének csökkentésére szolgál, hogy a felhasználó számára kellemesebb élményt biztosítson.

5) Röviden nyomja meg a szint gombot a szint beállításához (az 1. szint a legalacsonyabb, a 8. szint a legmagasabb), válassza ki a megfelelő szintet, amelyet a bőr elvisel.

6) Helyezze a kezelőablakot laposan a kívánt bőrfelületre teljes bőrkontaktussal, a jelzőfény zöldre vált - ez azt jelenti, hogy a készülék készen áll a működésre, és megnyomhatja a villanófény gombját a szőr eltávolításához.

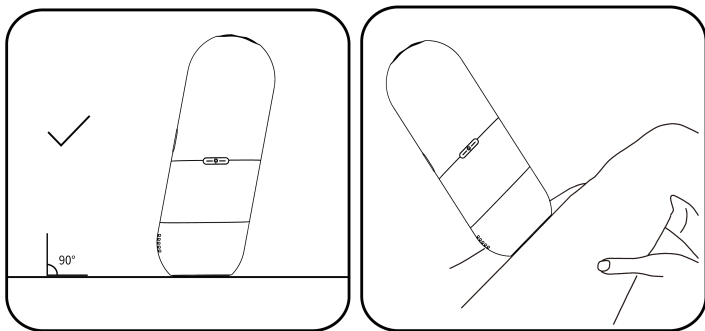

7) Nyomja meg a villanófény gombját. A készülék villogni kezd, és érezhető lesz a meleg.

8) Mozgassa a készüléket a következő kezelendő területre, és ismételje meg a műveletet.

9) Többszöri villanás után a termék automatikusan megjeleníti a blokkolás ikonját a képernyőn. Ebben az időben nem lehet kezelni a szint és a mód gombját. A készülék feloldásához röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.

10) A kezelés befejezése után nyomja meg a bekapcsoló gombot 2 másodpercig a készülék kikapcsolásához - ez azt jelenti, hogy a készülék visszatér az alvó üzemmódba, kikapcsol, és a jelzőfény fehér színben világít. Az adapter eltávolítása után a készülék ki van kapcsolva és nem világít.

FIGYELEM:

- 5 perc inaktivitás után a készülék szintén alvó üzemmódba lép.

11) Tisztítsa meg a készüléket tiszta ruhával vagy vattapamaccsal, majd helyezze vissza a készüléket és tartozékait a dobozba, és tárolja biztonságos helyen.

Kijelzett szimbólum	Leírt probléma	Megoldás
A négy jelzőfény az ujj terület, az arc terület, a kar terület és a hónalj terület ikonjaihoz gyorsan villog egyszerre.	Mivel a készülék következő feltételek mellett nem működhet: 1) A termék magas környezeti hőmérsékleten működik; 2) A légbeömlő vagy a légkiömlő nyílás el van tömődve; 3) Ha a fenti kettő nem áll fenn, a termék sérült,	1) Csak meg kell változtatni a környezetet alacsony hőmérsékletre 2) Távolítsa el a idegen tárgyat, és néhány perc múlva térjen vissza a normál állapotba; 3) A készüléket vissza kell küldeni javításra. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
A két jelzőfény, az ujj terület ikonja és az arc terület ikonja gyorsan villog egyidejűleg.	Ha a ventilátor vagy az áramkör hibás, az ERROR2 jelzés jelenik meg.	A készüléket vissza kell küldeni javításra. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
A három jelzőfény, az ujj terület ikonja, az arc terület ikonja és a kar terület ikonja gyorsan villog egyidejűleg.	Ha a fő kondenzátor vagy a fő kondenzátorral kapcsolatos áramkör hibás, az ERROR3 jelzés jelenik meg.	A készüléket vissza kell küldeni javításra. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Csere

A készülék élettartama

Az otthoni használatra szánt IPL szőrtelenítő készülék élettartama elsősorban a készülék belsejében lévő IPL lámpa élettartamától függ, amely 510 000 alkalommal (lövés számláló) bocsátható ki. Ha az összes jelzőfény és kijelző egyszerre villog, az azt jelenti, hogy a készülék elérte a maximális felhasználási számlálót, és már nem használható - ekkor igény szerint cserélhető új otthoni használatra szánt IPL szőrtelenítő készülékre, amelyet a helyi forgalmazótól vagy a gyártótól lehet megvásárolni.

Karbantartás

Tisztítás

A tisztítás előtt kapcsolja ki és húzza ki a fő IPL készüléket.

Javasoljuk, hogy a kezelési ablakot minden használat előtt és után tisztítsa meg alkoholos vattakoronggal vagy vattakoronggal.

A háztartási IPL szőrtelenítő készüléket szárazon kell tartani. Soha ne merítse a készüléket vagy annak bármely részét vízbe, mivel ez áramütés veszélyéhez vezethet

.

Tárolás

A készülék és tartozékai sérülésének vagy elvesztésének elkerülése érdekében minden használat után helyezze vissza a háztartási IPL szőrtelenítő készüléket és tartozékait a dobozba.

Tisztítsd meg a készüléket a tárolás előtt.

A készüléket hűvös és száraz helyen tárold, közvetlen napfénytől távol. Ne tárold nedves vagy párás környezetben, mivel ez befolyásolhatja a termék működését.

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

Ha bármilyen probléma merül fel az otthoni használatra szánt IPL szőrtelenítő készülékkel, kérjük, olvassd el az alábbi információkat, hogy megpróbáld megoldani a problémát:

Probléma	Megoldás
Ha az otthoni használatra szánt IPL szőrtelenítő készülék nem kapcsol be:	Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik a készülékhez és a konnektorhoz.
Ha az otthoni használatra szánt IPL szőrtelenítő készülék nem bocsát ki impulzust:	1. Győződjön meg arról, hogy a készülék teljes érintkezésben van a bőrrel. A lámpa gombja csak akkor aktiválja a villanó impulzust, ha a készülék teljes érintkezésben van a bőrrel. 2. Biztonsági kockázat esetén a készülék lámpa nem fog impulzust kibocsátani.
Ha a házi IPL szőrtelenítő készülék használatakor melegséget és fájdalmat érez:	1. Használat előtt borotválja le a szőrszálakat a kívánt kezelési területen. 2. Válasszon egy Önnek megfelelő kezelési szintet. 3. NE használja többször ugyanazon a területen egyszerre.

FIGYELEM 1: Használati mód: STAMP vagy GLIDE

- Két ajánlott mód létezik: "STAMP" vagy "GLIDE".
- Függetlenül a választott módtól, a készüléket a villanások között kell mozgatni annak biztosítása érdekében, hogy ugyanazt a területet ne kezeljék kétszer.

- STAMP mód (kézi világítási mód): Ez a mód kézi és kis területekhez ajánlott, például hónaljhoz, bikinivonalhoz és archoz. Helyezze a készüléket a bőrre, nyomja meg és engedje el a villanófény gombját. Vegye le a készüléket a bőrről, mielőtt óvatosan újra felhelyezné a következő kezelendő területre.

- CSÚSZÁS: Ez a módszer automatikus és ajánlott nagyobb területekhez, például a lábakhoz. Helyezze a készüléket a bőrre, érintse meg az automatikus villanófény gombját a képernyőn, vagy tartsa lenyomva a villanófény gombot (folyamatosan nyomja), hogy belépjen az automatikus világítás módba, és az automatikus villanófény gomb villogni fog a képernyőn, majd húzza a készüléket a bőrön a villanások között. Próbáljon meg egyenletes sebességgel mozgatni a készüléket, amely biztosítja a teljes lefedettséget anélkül, hogy átfedné vagy kihagyna területeket. Ehhez a módhoz való kilépéshez röviden nyomja meg újra a villanófény gombot, vagy érintse meg újra az automatikus villanófény gombot.

FIGYELEM 2. Hibaüzenetek a működés során A működés során előforduló hibaüzenetek a következők:

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------