

**Gebrauchsanweisung**  
Vor Gebrauch sorgfältig lesen

**DEPIL<sup>PRO</sup>**

**HAARENTFERNUNG MIT INTENSIV  
GEPULSTEM LICHT**

Langfristige Entfernung der Haarwurzel

**Clarie**

Hergestellt in Frankreich

## **DEPIL**

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem DEPIL Gerät. Der neue und innovative Haarentferner mit gepulstem Licht ist wirklich einfach in der Handhabung und sorgt für professionelle Ergebnisse.

Sie profitieren von der gleichen hohen Qualität und Leistung der IPL-Haarentfernung, die Sie aus Kosmetik-Instituten kennen – ganz bequem bei sich zu Hause. Diese absolut zuverlässige Technik zerstört die Haarwurzel dank einer hochintensiven Lichtstrahlung. Eine schmerzfreie Entfernung der Haarwurzeln in allen Körperregionen ... mit langfristigem Erfolg.

DEPIL heißt Sie in einer neuen Beauty-Ära willkommen, in der Sie das ganze Jahr über seidige, glatte Haut haben werden.

Ergonomisch und stylish, leicht und sehr klein, mit einer hoch entwickelten Mikroprozessor-Technologie ausgestattet, für effiziente Ergebnisse dank unserer tiefgreifenden Forschung.

Wir danken Ihnen für den Kauf des CLARIE Produkts und Ihr Vertrauen in eine FRANZÖSISCHE MARKENFIRMA. Wir hoffen, Sie werden mit der Produktleistung sehr zufrieden sein und viele Jahre Freude daran haben.

Damit Sie möglichst lange Freude an dem Gerät haben, empfehlen wir Ihnen, die Gebrauchsanweisung zu lesen und den Hinweisen zu folgen.

Nun lassen Sie uns herausfinden, wie Ihr DEPIL funktioniert.

## **INHALT**

Wie das Gerät arbeitet .....	
Kontra-Indikationen.....	
Warnhinweise .....	
Inhalt der Box.....	
Beschreibung des Geräts.....	
Beschreibung des Kontroll-Displays .....	
Programmierung der Parameter .....	
Vorbereitung der Haarentfernung.....	
Vorbereitung des Gerätes .....	
Benutzung .....	
Häufigkeit der Anwendung .....	
Anmerkung .....	
Wartung des Gerätes .....	
Umweltschutz .....	
Inhaltsstoffe des Gels.....	
Nachlieferung des Gels.....	
Technische Details.....	
Sicherheitshinweise .....	
Kundenservice .....	
Garantie .....	

## **WIE DAS GERÄT ARBEITET:**

Um zu verstehen, wie das Haarentfernungsgerät arbeitet, ist es zunächst wichtig, den Prozess des Haarwachstums und das Prinzip des gepulsten Lichts zu verstehen.

Das Haar, das in der Hautschicht wächst, nennt man Follikel. Es entwickelt sich während eines dreiphasigen Zyklus, der in der Dauer variieren kann – je nach Individuum und Körperregion.

Anagenphase (Wachstum): Die Haarwurzel, auch Follikel genannt, wird von der dermalen Papille, die lebende Zellen enthält, versorgt. Deshalb ist das Haar mit dem Follikel verbunden.

Katagenphase (Übergang): Während das Haar wächst, entwickeln sich neue Zellen, ältere Zellen verkümmern. Das Haar wird von der Papille getrennt. Das Haarfollikel verkürzt sich.

Telogenphase (Endphase): Das Haar wird nicht länger versorgt, es wird dünner und fällt zu Beginn eines neuen Wachstumszyklus aus.

Das Prinzip der Haarentfernung durch den Einsatz von Licht besteht darin, dass eine intensivierete Lichtquelle für die thermische Zerstörung des Haares sorgt.

Von der Lampe wird ein Lichtstrahl ausgesandt, dessen Spektrum von der Haut nicht reflektiert wird, sondern diese durchdringt. Dieser wird vom Haarschaft eingefangen und an die Haarwurzeln weitergeleitet und dann vom Melanin, dem Pigment, das die Haarfarbe bestimmt, selektiv absorbiert.

Die schnelle Absorbierung des Lichtes sorgt für einen starken Temperaturanstieg innerhalb des Haarfollikels. Die Wärme erreicht die Haarwurzel, löst das Follikel und zerstört ebenso das Reservoir der germinativen Zellen. Das Haar wird ohne ein Risiko für Ihre Haut zerstört.

DEPIL ist ein Haarentferner mit intensiv gepulstem Licht, der absolut sicher und speziell für die Entfernung der Haarwurzel entwickelt wurde.

Bei Auftragen des Gerätekopfes auf der zu behandelnden Fläche werden durch den Belichtungskristall kontrolliert intensive Lichtblitze abgegeben, die aber auf der Haut nicht spürbar sind. Diese Energie wird in Wärme umgewandelt und zielt nur auf das Melanin, um das Haarfollikel und das Reservoir der regenerativen Haarzellen zu zerstören.

Die Umwandlung von Licht in Wärme für das vorgesehene Ziel ist selektiv. Dank präziser Einstellungen wird angrenzendes Gewebe nicht zerstört.

Das Sicherheitssystem optimiert die Lichtimpulse durch automatische Anpassung der verschiedenen Parameter. Dieser Prozess zerstört die Haarwurzel auf sichere Weise, sie wächst nicht nach.

Das Programmieren des Gerätes erlaubt eine personalisierte Behandlung, bei der die verschiedenen Haut- und Haartypen berücksichtigt werden.

Nicht alle Haare befinden sich zur selben Zeit in einer Körperregion in der gleichen Wachstumsphase.

Für lang anhaltende und wirkungsvolle Ergebnisse sollte das Haar in der aktiven Phase behandelt werden, was eine Anwendung in regelmäßigen Intervallen bedeutet.

## **KONTRA-INDIKATIONEN:**

DEPIL kann von jedem gesunden Erwachsenen verwendet werden, in folgenden Fällen wird empfohlen, ärztlichen Rat einzuholen:

- Frische Narben oder Krampfadern
- Patienten, die Medikamente einnehmen, die die Lichtempfindlichkeit steigern
- Patienten, die ein Antikoagulans einnehmen
- Schwangere Frauen.

## **WARNHINWEISE:**

Die Lüftungsöffnungen im unteren Teil des Gerätes nicht mit der Hand abdecken.

Bei starker Wärmeentwicklung sollte das Gerät ausgeschaltet werden und für einige Minuten abkühlen.

Das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder eines Aerosols verwenden.

Sollten Sie das Gerät prüfen wollen, stellen Sie sicher, dass es ausgesteckt und ausgeschaltet ist. Bevor Sie es verstauen, sollte es einige Minuten abkühlen.

Benutzen Sie das Gerät nur mit dem vorhandenen Stromkabel.

Tragen Sie das Gerät nicht am Stromkabel.

Das Kabel nicht um das Stromgehäuse wickeln. Zustand regelmäßig kontrollieren.

Zur Kontrolle und Reparatur des Haarentferners ist eine spezielle Ausstattung notwendig. Unsachgemäße Reparatur kann zu Sicherheitsmängeln bei der Benutzung führen.

Es wird empfohlen, Sonneneinstrahlung, UV-Licht oder Selbstbräunungscremes zwei Wochen vor und nach jeder Benutzung zu vermeiden.

Benutzen Sie niemals Alkohol, Parfüm oder ein Deodorant nach der Haarentfernung.

Benutzen Sie das Gerät nicht bei Wunden, im Brustbereich, an den Brustwarzen, Genitalien oder Augenbrauen.

Nicht in der Badewanne oder Dusche verwenden.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bei unsachgemäßem Gebrauch haftet der Hersteller nicht.

## **INHALT DER BOX:**

- Haarentferner mit intensiv gepulstem Licht
- Kontaktgel
- Stromkabel
- Schutzbrille
- Rasierer
- Set mit selbstklebenden Patches
- Sprühreiniger
- Anleitungsvideo
- Aufbewahrungshülle
- Gebrauchsanweisung

## **BESCHREIBUNG DES GERÄTS:**

Das innovative Konzept des Geräts zur Haarentfernung bietet eine kompakte und leichte Handhabung und Anwendung. Das ergonomische Design sorgt für eine bequeme und sehr präzise Bedienung.

Das gepulste Licht wird durch einen Belichtungskristall gestreut und deckt einen Hautbereich von 3,9 cm<sup>2</sup> ab.

Das automatische Auslösen mit einmaligem Knopfdruck garantiert eine schnelle Ausführung.

Das Gerät ist so konzipiert, dass das Fehlerrisiko dank eines Anti-Aktivierungscodes minimiert ist.

Sicherheit beim Auslösen des Blitzes ist durch die beiden Sicherheitssensoren und den Druckkontakt des Kristalls auf der Haut gewährleistet.

Das fotoelektrische Regulationssystem kontrolliert die konstante Abgabe des Lichtblitzes, um die Lebensdauer der Lampe zu optimieren/maximieren. Es wird kontinuierlich luftgekühlt.

Mit einer ständigen Temperaturregelung am Stromversorgungskreislauf wird eine Überhitzung des Geräts vermieden.

## **BELICHTUNGSKRISTALL:**

Er befindet sich vorne am Gerät und bündelt den Lichtblitz, streut und verteilt diesen gleichmäßig über die gesamte Oberfläche.

## **SICHERHEITSSENSOREN**

Zwei Metallsensoren, die sich vorne auf jeder Seite des Kristalls befinden, stellen in Verbindung mit dem Gel den Kontakt zur Haut her.

## **BESCHREIBUNG DES KONTROLLDISPLAYS**

Das intuitive Display und der digitale Bildschirm erlauben eine individuelle Abstimmung auf den Benutzer.

## **DIGITALES MULTIFUNKTIONSDISPLAY**

Der Haarentferner ist mit einem digitalen Display ausgestattet, das die wichtigsten persönlichen Parameter anzeigt und die Kontrollinformationen liefert.



Symbol für helle Haut



Symbol für dunkle Haut



Symbol feine Behaarung / mittel und hell




Symbol für starke und dunkle Behaarung



Sicherheitssymbol



Auslösesymbol

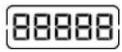

Lichtblitzzähler

Der Lichtblitzzähler zeichnet die Gesamtzeit der abgegebenen Lichtblitze je Gerät seit der ersten Benutzung auf.

### **STARTLICHT:**

Licht 1 leuchtet grün wie das Symbol. Das bedeutet, dass alle Parameter, die die Stromversorgung der Lampe betreffen, einwandfrei funktionieren. Wenn es leuchtet, ist der Lichtblitz einsatzbereit.

### **SICHERHEITSLICHT**

Licht 2 leuchtet blau wie das Symbol. Das bedeutet, dass genügend Gel auf der Haut aufgetragen und der Belichtungskristall korrekt auf der zu behandelnden Fläche positioniert ist. Wenn es leuchtet, ist der Lichtblitz einsatzbereit.

### **HAUTBESTIMMUNGSTASTE:**

Zeigt den gewählten Hauttyp an: helle oder dunkle Haut je nach Farbe des Hautsymbols.

Mit jedem Drücken auf Taste 1 ändert sich der Hauttyp, dies wird auch mit einem Piepton signalisiert.

### **HAARBESTIMMUNGSTASTE:**

Für die Start-Codierung und die Haartyp-Auswahl: Feines oder mittleres Haar oder dickes, dunkles Haar, wird von der Farbe des Haarsymbols angezeigt.

Mit jedem Drücken auf Taste 1 ändert sich der Hauttyp, dies wird auch mit einem Piepton signalisiert.

### **STOP-TASTE:**

Dient der Eingabe des Nummerncodes und dem Ausschalten des Geräts. Durch längeres Drücken auf Taste 3 gibt das Gerät 4 Piepsignale ab und schaltet sich dann automatisch ab.

### **AKTIVIERUNGSCODE:**

Die Eingabe eines vierstelligen Zahlencodes ist zur Aktivierung des Gerätes erforderlich. Dies geschieht durch Drücken der folgenden Tasten – nacheinander:

3 – 2 – 2 – 3.

Wenn der Code korrekt eingegeben wurde, gibt das Gerät 5 Mal ein Piepsignal von sich. Wenn der Code inkorrekt eingegeben wurde oder die Eingabe länger als 10 Sekunden dauerte, gibt das Gerät 10 Mal Piepsignale von sich und der Code muss neu eingegeben werden.

### **AUSLÖSER:**

Er aktiviert das Blitzlicht mit jedem Betätigen. Wird der Auslöser betätigt, ertönt ein Piepsignal.

### **PROGRAMMIERUNG DER PARAMETER:**

Die Körperregionen, die mit dem Gerät behandelt werden können, sind folgende:

- für Frauen: Unterarme, Arme, Bikinizone und Beine
  - für Männer: Unterarme, Rücken, Brust, Arme und Beine
- Zum Schutz Ihrer Augen empfehlen wir Ihnen, das Kinn oder die Oberlippe nicht selbst zu behandeln.

Am besten fragen Sie eine nahestehende Person, das Blitzlicht zu aktivieren, was sicherer und präziser ist. Dabei sollten Sie beide Ihre Augen mit Schutzbrillen schützen.

Um beste Ergebnisse zu erzielen, programmieren Sie das Gerät je nach persönlichem Haut- und Haartyp. Diese Information wird vom Gerät gespeichert und bei jeder Benutzung abgerufen.

Der Hauttyp wird je nach Lichtempfindlichkeit bestimmt:

- Helle Haut, bräunt leicht und bekommt schnell einen Sonnenbrand.
- Dunkle Haut, bräunt schnell und bekommt nur selten einen Sonnenbrand

Der Haartyp wird wie folgt klassifiziert:

- Feines / mittelhelles Haar - gewöhnlich an Armen und Beinen
- Dickes, dunkles Haar - gewöhnlich an den Unterarmen und der Bikinizone.

Die Haarentfernung durch intensiv gepulstes Licht funktioniert nicht bei weißem Haar. Probieren Sie das Gerät einige Stunden, bevor Sie mit der kompletten Haarentfernung beginnen wollen, auf einer kleinen Testfläche aus. So können Sie sicherstellen, dass die Haut nicht empfindlich auf das Blitzlicht reagiert. Sollte es zu keiner Hautreizung kommen, kann das Gerät benutzt werden.

### **VORBEREITUNG VOR DER HAARENTFERNUNG:**

Am effektivsten ist die Haarentfernung mit intensiv gepulstem Licht nach einer „traditionellen“ Haarentfernung. Sie sollten vorher für sich festlegen, wann der beste Zeitpunkt für eine Haarentfernung ist. Beinhaltet Ihre gewöhnliche Methode:

- Einweg- oder elektrische Rasierer, so gibt es keine Wartezeit.
- Haarentfernungscreme, sollten Sie eine Woche warten.
- Elektrische Haarentfernung, sollten Sie drei Wochen warten.
- Wachs oder Pinzette, sollten Sie drei Wochen warten.

Die Behandlung erfordert keine besondere Vorbereitung für die Haut. Sie sollte gesund, ohne Rötungen oder Verbrennungen und sehr sauber, ohne eine Spur von Lotionen, Cremes oder Öl sein. Markieren Sie die zu behandelnde Stelle beispielsweise mit einem weichen Stift. Rasieren Sie die Stelle mit einem Einwegrasierer, wenn die Haut feucht ist, so erreichen Sie ein tieferes Eindringen des Blitzlichtes.

Als nächstes sollten Sie die Haut mit Wasser reinigen, um alle Haarreste zu entfernen.

Bedecken Sie kleine Flächen, die nicht behandelt werden sollen (z. B. Muttermale) mit den mitgelieferten Klebepatches.

Es ist sehr wichtig, dass Sie das Kontaktgel auf die zu behandelnde Stelle auftragen, um das Blitzlicht zu leiten und zu verteilen und um die Haut zu kühlen.

Damit das Gel nicht zu schnell trocknet, sollten Sie die Fläche mehrfach mit Gel einstreichen, je nachdem, wie Sie das Gerät bewegen. Verteilen Sie es gleichmäßig mit leichten, kreisenden Bewegungen. Wurde das Gel dem Blitzlicht ausgesetzt, darf es nicht abgetragen und wieder auf einer anderen Körperregion aufgetragen werden.

## **VORBEREITUNG DES GERÄTS:**

Dieses Gerät hat zahlreiche programmierte Funktionen, die für absolute Sicherheit und eine einfache Benutzung sorgen:

- Der Lichtblitz wird nur abgegeben, wenn zuvor das Gel auf die Haut aufgetragen wurde und der Belichtungskristall fest auf die entsprechende Hautregion gedrückt wurde.
- Ist der Auslöser aktiviert und der Sicherheitsmodus ausgeschaltet, wird das Gerät nicht funktionieren, es ertönen 8 Pieptöne.
- Das Gerät schaltet von selbst ab, wenn es länger als drei Minuten nicht benutzt wird.
- Bei technischen Problemen schaltet sich das Gerät automatisch ab und das Startsymbol und Licht 2 bleiben ausgeschaltet.

Entfernen Sie die Schutzkappe und reinigen Sie den Belichtungskristall vor Benutzung mit dem Reinigungsspray und einem weichen Tuch. Er sollte sauber und staubfrei sein.

Wichtig: Tragen Sie die mitgelieferte Schutzbrille, um Ihre Augen während der Behandlung vor dem ausgestrahlten Licht zu schützen.

Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, stellen Sie sicher, dass die Netzspannung für das Gerät geeignet ist. Wenn Sie das Gerät einstecken, werden Sie zwei Pieptöne hören.

## **BENUTZUNG:**

### Schritt 1:

Schalten Sie das Gerät ein und geben Sie mit den Tasten 2 und 3 den Zahlencode ein, dieser lautet: 3 – 2 – 2 – 3. Sie werden fünf Pieptöne hören, das Licht auf dem Display leuchtet und das Gerät unterzieht sich einem Selbsttest – das dauert etwa drei Sekunden. Das Gerät schaltet dann in den Ruhemodus und die Symbole erscheinen auf dem Display. Das Licht 1 leuchtet grün.

### Schritt 2: Bestimmen Sie Ihren Hauttyp

Drücken Sie die Schaltfläche 1, um sich den Ihrer Haut entsprechenden Hauttyp anzeigen zu lassen. Der Hauttyp wird angezeigt und gespeichert.

### Schritt 3: Bestimmen Sie Ihren Haartyp

Drücken Sie Schaltfläche 2, um sich den ausgewählten Haartyp anzeigen zu lassen. Der ausgewählte Haartyp wird angezeigt und gespeichert.

#### Schritt 4:Verwenden Sie das Gerät

Straffen Sie die Haut und platzieren Sie den Belichtungskristall direkt auf der zu behandelnden Region. Positionieren Sie das Gerät so, dass Sie es bequem halten können. Üben Sie etwas Druck auf die Haut aus, damit der Kristall fest in der Halterung sitzt und die beiden Metallsensoren mit dem Gel in Kontakt kommen. Der Sicherheitsmodus ist nun entriegelt, Licht 2 leuchtet blau und das Sicherheitssymbol erscheint auf dem Display.

#### Schritt 5:Aktivieren Sie das Blitzlicht

Drücken Sie den Auslöser, um das Blitzlicht zu aktivieren. Licht 1 und das Aktivierungssymbol sind kurz ausgeschaltet und erscheinen wieder, wenn der Blitz erloschen ist. Sie sollten nicht mehr als drei aufeinanderfolgende Blitze auf derselben Körperregion generieren.

#### Schritt 6:Bewegen Sie das Gerät

Verringern Sie den Druck auf den Kristall und fahren Sie mit der Haarentfernung fort, indem Sie das Gerät in einem gleichmäßigen Muster über die entsprechenden Regionen führen.

#### Schritt 7: Beenden Sie die Anwendung

Wenn Sie die Anwendung beendet haben, schalten Sie das Gerät durch Drücken auf Taste 3 aus. Sie werden 4 Pieptöne hören, das Gerät schaltet dann automatisch ab.

### **HÄUFIGKEIT DER SITZUNGEN:**

Das Haar wird durch das intensiv gepulste Licht nur in der Wachstumsphase gehemmt. Da das Haarwachstum zyklisch ist, ist eine Serie von Sitzungen notwendig. Weitere Faktoren sind die Haardicke, die Haarfarbe und die Körperregion. Die folgende Tabelle zeigt die Haardichte pro cm<sup>2</sup>, die Prozentzahl der Haare in der Wachstumsphase und die Gesamtlänge eines Zyklus in der jeweiligen Körperregion:

Bereiche	Haardichte pro cm <sup>2</sup>	Haare in der Wachstumsphase	Länge der Haarzyklen
Oberlippe	350	60 %	5 Monate
Kinn	100	20 %	15 Monate
Arme	80	40 %	9 Monate
Unterarme / Bikinizone	65	30 %	18 Monate
Beine	60	25 %	16 Monate

Eine Reihe von Behandlungen über einen gewissen Zeitraum verteilt, sorgen für die Zerstörung des Haars während der Wachstumsphase. Dickes und helles Haar braucht eine längere Behandlungsdauer. Im Allgemeinen sind 6 bis 12 Sitzungen für eine komplette und effektive, d. h. langfristige Haarentfernung, notwendig. Die ersten drei Sitzungen sollten in regelmäßigen Intervallen von 4 bis 6 Wochen stattfinden, und dann abhängig vom Nachwachsen der Haare etwa alle 2 Monate während des Wachstumszyklus. Nach diesem Zeitraum sollten nur 1 bis 2 Sitzungen pro Jahr stattfinden, wenn sich die Follikel in der Anfangsphase befinden.

### **ANMERKUNGEN:**

Die Haarentfernung mit intensiv gepulstem Licht führt zu keinen Nebenwirkungen und die Anwendung ist nahezu schmerzfrei. Die Benutzung ist sehr komfortabel. Trotzdem kann es bei empfindlicher Haut vereinzelt zu kleinen Rötungen oder Blasen kommen, diese sollten aber nach einigen Stunden verschwinden – je nach Hauttyp. Sollte die Haut spannen oder irritiert sein, stoppen Sie die Anwendung und konsultieren Sie einen Arzt. Zwischen zwei Sitzungen sollten Sie die Körperhaare nicht mit Wachs, Enthaarungscreme oder einem Epilierer entfernen. Rasieren oder die Haare mit einer Schere zu kürzen, ist aber möglich. Während der Behandlung wird der größte Teil der Wurzeln zerstört, die Anzahl der Haare reduziert und die verbleibenden, verkümmerten Haare werden dünner und heller. Die Ergebnisse sind längerfristig. Mögliches Nachwachsen der Haare kann aufgrund von hormonellen Veränderungen und Alterung nicht vermieden werden.

### **WARTUNG DES GERÄTES:**

Aus hygienischen Gründen und zur Erhaltung einer störungsfreien Funktionsweise ist es notwendig, den Belichtungskristall und die beiden Metallsensoren nach jeder Benutzung zu reinigen, sobald diese abgekühlt sind.

Sprühen Sie das Reinigungsmittel auf ein weiches Baumwolltuch und reinigen Sie dann die einzelnen Elemente, damit alle Gelreste entfernt werden.

Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf.

Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem feuchten, weichen Tuch und etwas Seifenwasser. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Lösungsmittel.



### **UMWELTSCHUTZ:**

Geräte mit diesem Symbol dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Ein Entsorgungssystem für diesen Produkttyp ist von Ihrer Kommunalbehörde implementiert. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihre Kommunalbehörde.

Elektrische und elektronische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die schädigende Wirkungen auf Umwelt und menschliche Gesundheit haben können, und müssen recycelt werden.

## **ZUSAMMENSETZUNG DES GELS:**

Das Kontaktgel hat spezielle Eigenschaften, die es ermöglichen, dass das Blitzlichtspektrum ganzheitlich gestreut und vom Sicherheitssystem erkannt wird. Die oberen Hautschichten werden mit Feuchtigkeit versorgt.

Wasser – Carbomer – Natriumhydroxid – Kaliumsorbat – Natriumbenzoat – Magnesiumchlorid – Jodkalium.

## **NACHLIEFERUNG GEL:**

Für den sachgemäßen Gebrauch des Gerätes können Sie weiteres Gel dort kaufen, wo Sie auch das Gerät erworben haben. DEPIL Kontaktgel wird in Zweierpackungen verkauft.

## **TECHNISCHE DATEN:**

Abmessungen	: 240 x 82 x 66 mm
Gewicht	: 440 g
Spannung	: 230 Volt / 50 Hz
Ausgangsspannung	: 12 Volt - 4 A
Lichtquelle	: Xenon-Borosilikat-Blitzlampe
Wellenlänge	: 620 à 950 nm
Lichtenergie	: 6 J / cm <sup>2</sup>
Blitzdauer	: 8 ms
Behandelte Fläche	: 30 x 13 mm = 3,9 cm <sup>2</sup>
Blitzdauer-Intervall	: 10 Sekunden
Gesamte Blitzzahl	: 5
Lampen Kühlung	: Belüftung
Hauttyp-Auswahl	: hell oder dunkel
Haartyp-Auswahl	: fein, normal, hell, dunkel oder dick
Sicherheitssperre	: 4-Nummern-Code
Platzierungssicherheit	: Berührungsdetektor
Gelauftragungssicherheit	: Detektion durch 2 Sensoren
Einstellungskontrolle	: digitales Display
Sicherheitskontrollen	: digitales Display und Blinklicht
Aktivierungskontrolle	: digitales Display und Blinklicht
Sicherheitswarnung	: Audio-Signal
Blitzabgabe	: wenn alle Sicherheitskontrollen erfolgreich sind

## **SICHERHEIT:**

Das Gerät entspricht den geltenden EU-Sicherheitsrichtlinien und der elektromagnetischen Verträglichkeitsrichtlinie CE Nr. 89/336 EEC.

Kategorie Klasse II.

DEPIL ist allein für den Hausgebrauch konzipiert und darf nicht für professionelle Zwecke verwendet werden.

## **KUNDENDIENST:**

Dieses Gerät wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und entspricht hohen Qualitäts- und Leistungsstandards. Es wurde während der Herstellung mehreren Qualitätskontrollen unterzogen.

Wenn Sie zusätzliche Informationen zur Anwendung wünschen, zögern Sie bitte nicht, unseren Kundendienst zu kontaktieren.

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte direkt an den technischen Kundendienst.

CLARIE Kundendienst und technischer Kundendienst:

O.V.S. - Kundendienst

Westkai 20

27572 Bremerhaven

Hotline – TEL.: (00)49 (0)6221-434190

[info@salco-gmbh.com](mailto:info@salco-gmbh.com)

[www.salco-gmbh.com](http://www.salco-gmbh.com)

## **GARANTIE**

Der Kassenbeleg für den Erwerb dieses Gerätes ist zugleich die Garantie und sollte bei Rückgabe vorliegen. Die Garantie gilt für ZWEI Jahre für Ersatzteile und Arbeitsleistung ab Kaufdatum.

Die Garantie umfasst alle Funktionsprobleme und -fehler, die von versteckten Herstellungsfehlern herrühren, jedoch keine, die die Lampe oder den Kristall betreffen.

Sie umfasst keine Störungen, die sich auf falsche Spannungsversorgung, fehlerhafte Anwendung, Bruch infolge von Stößen, Demontage oder Oxidation oder einen Eingriff, der nicht durch unseren Kundendienst vorgenommen wurde, zurückführen lassen.

Die Garantie gilt nicht bei Beschädigungen und umfasst keinen Austausch oder Rückerstattung.