

## ENTSORGUNG



Die Elektro- und Elektronik-Geräteabfall (WEEE) Richtlinie (2012/19/EU) ist in Kraft, um die besten verfügbaren Verwertungs- und Recycling-Technologien zu nutzen und auf diese Weise den Einfluss auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche Substanzen aufzubereiten und ein Anwachsen der Mülldeponien zu verhindern. Das Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert. Sorgen Sie daher dafür, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgt wird. Es darf NICHT über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

## SPEZIFIKATIONEN

Modell: MMLD

Stromversorgung: 3 x AA-Batterien 1,5 V, LR6

**CE** Dieses Gerät entspricht den geltenden EU-Produktvorschriften.

Für alle Fragen und Probleme ist unser Kundendienst telefonisch für Sie erreichbar unter: **+44 (0)1242 702345** oder schreiben Sie uns eine E-Mail: **online@riobeauty.com**

Für Nachbestellungen über weiteres Zubehör besuchen Sie uns auf unserer Website **www.riobeauty.com** oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

© The Dezac Group Ltd 2017  
PO Box 17, Cheltenham Spa GL53 7ET, England

**www.riobeauty.com**

1-IN-MMLD-G/1.0

# BELEUCHTETER KOSMETIKSPIEGEL

Bedienungsanleitung



Ideal für Make-up und  
Schönheitsbehandlungen

## ENTSORGUNG



Die Elektro- und Elektronik-Geräteabfall (WEEE) Richtlinie (2012/19/EU) ist in Kraft, um die besten verfügbaren Verwertungs- und Recycling-Technologien zu nutzen und auf diese Weise den Einfluss auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche Substanzen aufzubereiten und ein Anwachsen der Mülldeponien zu verhindern. Das Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert. Sorgen Sie daher dafür, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgt wird. Es darf NICHT über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

## SPEZIFIKATIONEN

Modell: MMLD

Stromversorgung: 3 x AA-Batterien 1,5 V, LR6

**CE** Dieses Gerät entspricht den geltenden EU-Produktvorschriften.

Für alle Fragen und Probleme ist unser Kundendienst telefonisch für Sie erreichbar unter: **+44 (0)1242 702345** oder schreiben Sie uns eine E-Mail: **online@riobeauty.com**

Für Nachbestellungen über weiteres Zubehör besuchen Sie uns auf unserer Website **www.riobeauty.com** oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

© The Dezac Group Ltd 2017  
PO Box 17, Cheltenham Spa GL53 7ET, England

**www.riobeauty.com**

1-IN-MMLD-G/1.0

# BELEUCHTETER KOSMETIKSPIEGEL

Bedienungsanleitung



Ideal für Make-up und  
Schönheitsbehandlungen

**Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.**

## WICHTIGE INFORMATIONEN

- Dieses Produkt darf nur für den bestimmungsgemäßen, in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Gebrauch eingesetzt werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT, wenn es nicht völlig funktionsfähig ist oder nachdem es fallen gelassen oder beschädigt wurde.
- Platzieren Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe von Hitzequellen.
- Lassen Sie das Produkt NICHT UNBEAUF SICHTIGT in Reichweite von Kindern.
- Lassen Sie die Lampen des Spiegels abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.
- Platzieren Sie den Spiegel während der Nutzung nicht auf eine weiche Unterlage, z. B. ein Bett, Kissen usw., um ein Überhitzen zu verhindern.
- Es gibt keine Teile im Inneren des Geräts, die vom Anwender zu warten sind.

## REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät stets aus und reinigen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

**Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.**

## WICHTIGE INFORMATIONEN

- Dieses Produkt darf nur für den bestimmungsgemäßen, in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Gebrauch eingesetzt werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT, wenn es nicht völlig funktionsfähig ist oder nachdem es fallen gelassen oder beschädigt wurde.
- Platzieren Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe von Hitzequellen.
- Lassen Sie das Produkt NICHT UNBEAUF SICHTIGT in Reichweite von Kindern.
- Lassen Sie die Lampen des Spiegels abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.
- Platzieren Sie den Spiegel während der Nutzung nicht auf eine weiche Unterlage, z. B. ein Bett, Kissen usw., um ein Überhitzen zu verhindern.
- Es gibt keine Teile im Inneren des Geräts, die vom Anwender zu warten sind.

## REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät stets aus und reinigen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

## EINLEGEN VON BATTERIEN UND WEITERE HINWEISE


Zum Einlegen der Batterien öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Unterseite des Geräts, indem Sie es nach unten ziehen.

Legen Sie drei AA 1,5V LR6 Alkalibatterien entsprechend der (+) und (-) Markierungen im Batteriefach ein.

Schließen Sie das Batteriefach sicher.

- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät länger nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie KEINE wiederaufladbaren Batterien.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Batterien in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Ersetzen Sie stets alle drei Batterien gleichzeitig.
- Mischen Sie KEINE verschiedenen Batterietypen, z. B. Alkali- oder Standardbatterien (Zink-Kohle).

## GEBRAUCHSANLEITUNG

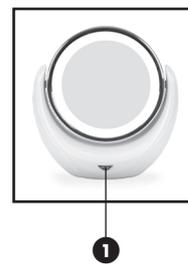

Entfernen Sie alle Verpackungsteile.

- 1 Schalten Sie die Spiegelbeleuchtung ein, indem Sie die EIN-/AUS-Taste auf der Vorderseite des Spiegels drücken.

Schwenken Sie den Spiegel um 180°, um von normaler Abbildung auf 5-fache Vergrößerung zu wechseln.

## EINLEGEN VON BATTERIEN UND WEITERE HINWEISE


Zum Einlegen der Batterien öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Unterseite des Geräts, indem Sie es nach unten ziehen.

Legen Sie drei AA 1,5V LR6 Alkalibatterien entsprechend der (+) und (-) Markierungen im Batteriefach ein.

Schließen Sie das Batteriefach sicher.

- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät länger nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie KEINE wiederaufladbaren Batterien.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Batterien in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Ersetzen Sie stets alle drei Batterien gleichzeitig.
- Mischen Sie KEINE verschiedenen Batterietypen, z. B. Alkali- oder Standardbatterien (Zink-Kohle).

## GEBRAUCHSANLEITUNG

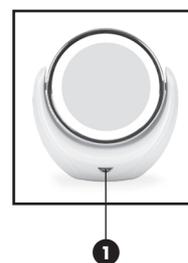

Entfernen Sie alle Verpackungsteile.

- 1 Schalten Sie die Spiegelbeleuchtung ein, indem Sie die EIN-/AUS-Taste auf der Vorderseite des Spiegels drücken.

Schwenken Sie den Spiegel um 180°, um von normaler Abbildung auf 5-fache Vergrößerung zu wechseln.