

## Manual de usuario



---

MASAJEADOR DE PIES 360°

## Índice

---

**Instrucciones de seguridad**

**Componentes del producto**

**Diagrama de funciones y uso**

**Ajustes**

**Especificaciones**

**Resolución de problemas**

**Mantenimiento y almacenamiento**

**Especificaciones técnicas**

**Garantía**

**Reciclaje**

## Instrucciones de seguridad

### Instrucciones importantes de seguridad

- 01) Asegúrese de leer el manual de usuario minuciosamente antes de utilizar el producto para garantizar la seguridad y su uso adecuado.
- 02) Asegúrese de utilizar el producto siguiendo las instrucciones indicadas en este manual.
- 03) Desconecte el producto de la corriente tras su uso o antes de su limpieza.
- 04) Utilice siempre la función de calor con cuidado para evitar quemaduras graves.
- 05) No utilice el producto en pieles sensibles o muy sensibles o en partes del cuerpo con mala circulación sanguínea.
- 06) No deje que los niños o personas con trastornos físicos o mentales utilicen la función de calor o el manejo inadecuado puede ser peligroso.
- 07) Para prevenir incendios, descargas eléctricas o lesiones provocadas por un sobrecalentamiento, no lo utilice nunca bajo una almohada o una manta.
- 08) No cubra el producto mientras lo utilice para evitar averías o daños por sobrecalentamiento del motor.
- 09) Se debe vigilar a los niños, personas con trastornos físicos o mentales y discapacitadas mientras utilicen el producto.
- 10) Deje de utilizarlo inmediatamente si se siente incómodo.
- 11) No utilice el producto si el cable de alimentación o el enchufe están estropeados, si se realizó un manejo inadecuado de este o si se ha caído al agua y se ha dañado. Póngase en contacto con el centro de servicios para repararlo.
- 12) No utilice repuestos no recomendados por los fabricantes.
- 13) No inserte o coloque objetos en ninguno de los orificios del producto.
- 14) Si corta el suministro, cierre todos los controles de operación antes de desconectar el producto de la corriente.
- 15) Este producto no puede utilizarse para realizar un autodiagnóstico o autotratamiento. Consulte con un profesional médico si necesita un diagnóstico o tratamiento.

### ➤ Entorno de uso

- 01) No utilice el producto en un entorno húmedo o polvoriento para evitar su avería.
- 02) No utilice este producto a una temperatura ambiente superior a 40°C.
- 03) No utilice el producto en el exterior.
- 04) No utilice este producto cerca de un calentador eléctrico o bajo la luz solar directa.


➤ **No se recomienda que las siguientes personas utilicen el producto**

- 01) Consulte al médico antes de utilizarlo si se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:
- 02) Está en tratamiento médico o presenta malestar físico.
- 03) Padece hipertensión arterial, cardiopatías, arteriosclerosis y trombosis cerebrales.
- 04) Tiene cáncer.
- 05) Está embarazada o menstruando.
- 06) Padece osteoporosis.
- 07) Utiliza un marcapasos o dispositivos médicos implantados.
- 08) Padece una enfermedad grave.
- 09) Menores de edad.

➤ **Botones**

- 01) No utilice los botones con las manos mojadas.
- 02) Mantenga los botones lejos del agua y otros líquidos.
- 03) No se duerma mientras utiliza el producto.
- 04) No lo utilice si está ebrio o no se siente cómodo.
- 05) No toque directamente la almohadilla del masajeador con las manos, las articulaciones de los pies, las rodillas, el pecho y el abdomen.
- 06) No utilice el producto durante más de 30 minutos seguidos.
- 07) No utilice el producto si la funda de tela está dañada.
- 08) No utilice el producto una hora antes y después de comer para evitar efectos adversos.
- 09) No active la función de calor si utiliza el producto en una habitación a una temperatura baja. Se recomienda ajustar progresivamente la temperatura a un rango normal antes de encender el calor.
- 10) Si el producto se utiliza inmediatamente después de pasarlo de un entorno frío a uno caluroso, la acumulación del vapor de agua dentro de este puede afectar su funcionamiento normal o incluso provocar una avería mecánica. Se recomienda colocarlo en una habitación a temperatura normal una hora antes de empezar a utilizarlo.

## Componentes del producto

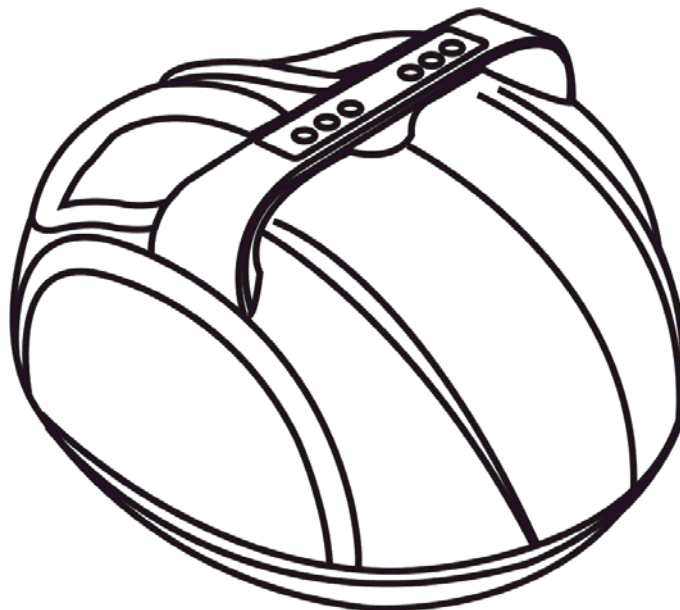

On/Off – Intensidad – Temporizador – Calor – Modo – Vibración


- Superficie central: seis botones independientes que controlan los ajustes y funciones del producto.
- Almohadilla central del masajeador: rascado y acupresión en los arcos con calor.
- Almohadilla frontal del masajeador: presión con rodillos y acupresión en la parte frontal de las plantas.
- Almohadilla trasera del masajeador: presión por empuje y acupresión en los talones.
- Bolsa de aire interior: presión de aire en los empeines.
- Cubierta de tela extraíble y lavable.
- Parte inferior: cable enrollable para mantener todo ordenado.

# Diagrama de funciones y uso

## Características del producto

- 01) Bonito diseño ligero y portátil.
- 02) Combinación de diferentes funciones, incluyendo presión con rodillos, acupresión, presión de aire y calor.
- 03) Masajeador que proporciona masajes completos y acupresión profunda para relajar los meridianos energéticos del cuerpo y de las zonas de reacción del pie.
- 04) Funda extraíble y lavable para una limpieza constante.
- 05) Cable enrollable para una mayor comodidad.

## Ajustes

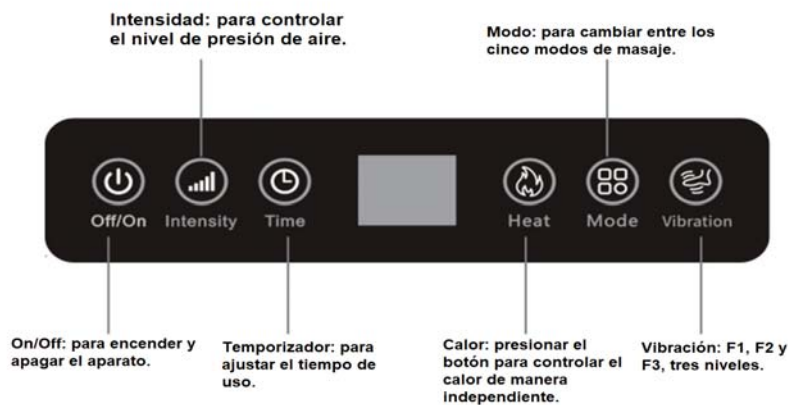

## Mando a distancia



On/Off  
Heat-Calor  
Intensity-Intensidad  
Mode-Modo  
Time-Temporizador  
Vibration-Vibración  
\*2 Pilas AAA no incluidas

## Especificaciones

Coloque el masajeador de pies en el suelo frente a una silla cómoda y enchúfelo en la toma de corriente principal. Siéntese en una posición cómoda.

- 1) Encienda el aparato pulsando el botón de encendido.
- 2) Seleccione la intensidad en el botón **Intensidad**, desde L1 a L9. Está seleccionada por defecto la L5.
- 3) Seleccione la duración en el botón **Temporizador**, puede fijarse desde 5 a 30 minutos. Está seleccionado por

defecto 15 minutos.

4) Seleccione encender/apagar el calor en el botón **Calor**.

5) Seleccione el modo en el botón **Modo**, hay cinco (P1-P5):



Modo 1/Modo 2/Modo 3/Modo 4/Modo 5

Modo 1: presión de aire+calor+rodillo hacia delante y hacia atrás

Modo 2: presión de aire+calor+rodillo hacia delante

Modo 3: presión de aire+calor+rodillo hacia atrás

Modo 4: calor+rodillo hacia delante y hacia atrás

Modo 5: presión de aire+calor

6) Seleccionar vibración en el botón **Vibración**, hay tres niveles (F1-F3). En F está apagada.

7) Apague el aparato pulsando el botón de apagado y desenchúfelo de la toma eléctrica después de utilizarlo.

## Resolución de problemas

Consulte los siguientes consejos y posibles soluciones si surgen problemas durante el uso de este producto. Puede devolver el producto al centro de servicios o someterlo a una inspección y reparación por técnicos autorizados.

Problemas	Posibles causas	Soluciones
No funciona	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Está desenchufado</li> <li>2.No ha pulsado el botón de encendido</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conecte el producto a la corriente o compruebe si está bien conectado.</li> <li>2. Pulse el botón de encendido.</li> </ol>
Deja de funcionar de repente	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Desconexión de la corriente</li> <li>2.Funcionamiento superior a 15 minutos</li> <li>3.Sobrecalentamiento del producto</li> <li>4.Demasiada presión operativa, las bolas de masaje dejan de rotar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 . Compruebe si el producto está enchufado.</li> <li>2.Reinicie el producto.</li> <li>3.Reinicie el producto cuando se enfríe.</li> <li>4.Reinicie el producto.</li> </ol>

## Mantenimiento y almacenamiento

### ➤ Almacenamiento

- 01) El producto debe colocarse en su envase original y guardarse con cuidado, en un lugar seco, fresco y bien ventilado cuando no se utilice.
- 02) No gire el botón de encendido ni retuerza el cable de alimentación.
- 03) No cuelgue el producto por el cable.
- 04) Evite rayar la superficie del producto con objetos punzantes.
- 05) No coloque el producto bajo la luz solar directa ni en temperaturas altas.

### ➤ Limpieza

- 01) Asegúrese de que el producto está apagado y desenchufe el cable antes de empezar a limpiarlo.
- 02) Utilice un trapo seco para limpiar la superficie del producto.
- 03) No cuelgue el producto por el cable.

**Nota:** No utilice detergentes agresivos, como benceno o disolvente, para limpiar el producto.

### ➤ Mantenimiento

- 01) Mantenga el producto limpio y lejos de la humedad.
- 02) Utilice una bolsa, o caja para cubrir el producto y, así, prevenir que le entre polvo si no se utiliza durante un periodo largo.

### Especificaciones técnicas

Modelo TD001F-10

Voltaje: 220-240v

Potencia 50w

### Garantía

En los siguientes casos la garantía según la normativa vigente no se hará efectiva:

- a. Cualquier daño resultado de cualquier reparación o manipulación no autorizada por la compañía.
- b. Cualquier daño resultado de un mal uso, negligencia o accidente.
- c. Cualquier daño causado por desastres naturales o voltaje anormal.
- d. Cualquier daño resultado de casos de usos de la máquina en otros contextos que no sea el descrito en este manual.

### Reciclaje



Los materiales de desecho de productos eléctricos no deben echarse al contenedor de basura junto con el resto de desperdicios del hogar. Estos materiales deben devolverse a la tienda donde se adquirieron o bien llevarlos a un punto específico para su reciclaje o eliminación. Según la normativa de la 2002/96/EC.

**Estimado Cliente, ante cualquier duda relacionada con este artículo, puede ponerse en contacto con nuestro SAT. Estaremos encantados de poder ayudarle.**  
**info@amacoregalos.com**