


Dispositivo de presoterapia termo articular

ES

SISTEMA DE PRESOTERAPIA

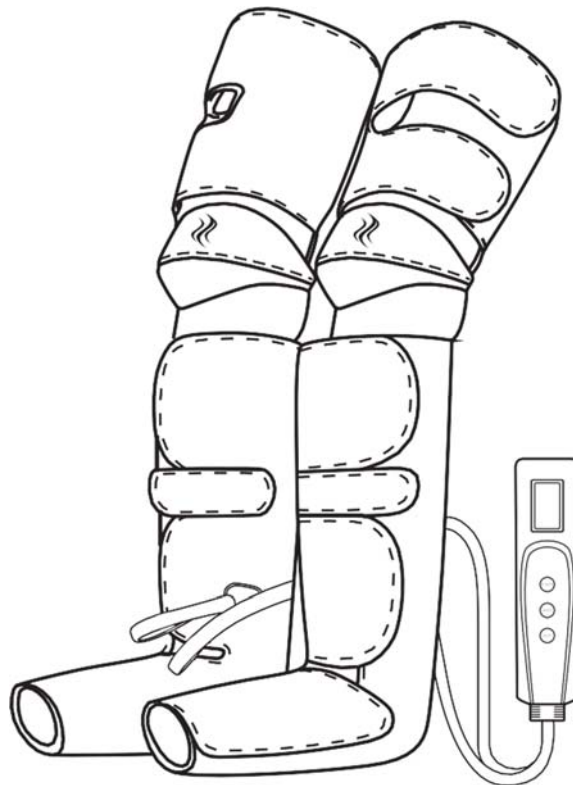

Lea detenidamente este manual de instrucciones antes del primer uso y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Dispositivo de presoterapia termo articular

1. CONTENIDO

Masajeador

Manual de instrucciones

Adaptador

PARTES

1)- Botas de masaje

2- Tubos

3 y 4- Mando con pantalla LCD



2. MEDIDAS DE SEGURIDAD

No utilice el dispositivo con un voltaje diferente al especificado en el adaptador.

Nunca intente reparar usted mismo el dispositivo.

No utilice el dispositivo en un lugar con humedad, si se moja la unidad, no la utilice.

No utilice este aparato en lugares con mucha temperatura ambiental.

Este dispositivo no ha de dejarse al alcance de los niños ni de personas con discapacidad intelectual, en caso contrario, siempre ha de estar supervisado por un adulto responsable.

No utilice este dispositivo si tiene la piel quemada o dañada.

Ante cualquier enfermedad del corazón, de circulación, si tiene implantes... consulte con su médico.

Deje de utilizar el dispositivo si empieza a sentirse mal o indispuesto.

3. MANDO

Dispone de pantalla de LCD para visualizar fácilmente las características del masaje.

Presione durante unos segundos el botón **POWER**, a continuación presione de nuevo este botón para seleccionar el nivel de intensidad (alta-media-baja).


Para apagar el dispositivo, presione el botón **POWER** durante unos segundos.

MODE, esta presoterapia dispone de 3 modos de masaje:

-Modo 1. Piernas completas.

En la pantalla se muestra **MODE 1 Calf**, la acción del masaje se realiza en las tres partes diferenciadas de las botas: pies, gemelos y muslos.

-Modo 2. Solo muslos y gemelos.

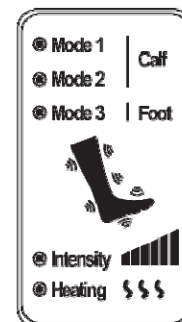


Dispositivo de presoterapia termo articular

En la pantalla se muestra MODE 2 Calf, puntos de masaje sólo en gemelos y muslos.

-Modo 3. Solo pies.

En la pantalla se muestra MODE 3 Foot, la localización del masaje se centra en los pies.

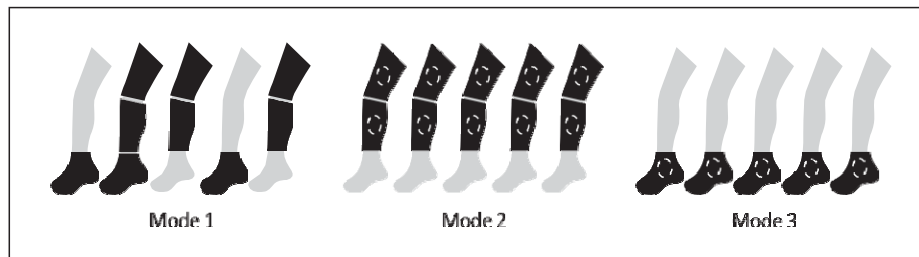

HEAT

Presionando dicho botón, se acciona el calor en la zona de la rodilla, lo que ayuda a aumentar la sensación de relajación de las piernas y a disminuir posibles molestias musculares.

4.FUNCIONAMIENTO

Conectar a la corriente eléctrica.

Colocar en las piernas las botas adaptándolas con el velcro a sus medidas corporales.

Presionar el botón POWER y seleccionar con él la intensidad deseada. Seleccionar el modo de masaje con el botón MODE y si se desea calor o no con el botón HEAT.

Para apagar el dispositivo, presione durante unos segundos el botón POWER.

NOTA: tras 20 minutos de uso, el dispositivo se apagará automáticamente.

5.CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Guardar en un lugar seco, alejado de la luz solar o fuentes de calor.

Limpiar con un trapo húmedo, nunca introducir en agua.

6.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 12V 2A

Potencia consumida: 24W

Apagado automático: 20 min



Dispositivo de presoterapia termo articular

7. GARANTIA

En los siguientes casos la garantía no se hará efectiva:

- Cualquier daño resultado de cualquier reparación o manipulación no autorizada por la compañía.
- Cualquier daño resultado de un mal uso, negligencia o accidente.
- Cualquier daño causado por desastres naturales o voltaje anormal.
- Cualquier daño resultado de casos de usos de la máquina en otros contextos que no sea el descrito en este manual.

8. RECICLAJE



Los materiales de desecho de productos eléctricos no deben echarse al contenedor de basura junto con el resto de desperdicios del hogar. Estos materiales deben devolverse a la tienda donde se adquirieron o bien llevarlos a un punto específico para su reciclaje o eliminación. Según la normativa de la 2002/96/EC.

9.SAC

Estimado Cliente, ante cualquier duda relacionada con este artículo, puede ponerse en contacto con nuestro SAT. Estaremos encantados de poder ayudarle.

Info@amacorealos.com