



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: HTB-800



Máquina de Presoterapia Profesional

Le agradecemos la selección de nuestros instrumentos por su parte.
Para una mejor capacidad y seguridad, rogamos lea este manual antes de utilizarlo.

Introducción:

La tecnología de presión del aire ha sido muy bien recibida y respetada por la comunidad médica mundial y la industria de la belleza desde que se empezó a utilizar como terapia física. Hoy en día, la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados. Se ha convertido en un instrumento insustituible que no es sólo económico, sino también muy fiable y seguro y además no sólo puede curar distintos tipos de síntomas y satisfacer distintos tipos de necesidades, sino que también produce efectos positivos significativos.

Para distintos síntomas como el exceso de humedad en el cuerpo, acumulación de grasas y toxinas, obstrucción linfática, venas varicosas, visualización de pequeños vasos sanguíneos, etc., los manguitos por presión de aire, mediante el principio de contracción y relajación intermitente de los airbags, propicio para estimular el funcionamiento del tejido linfático, descomponen la acumulación de grasas, eliminan las toxinas y activan la circulación de la sangre, con el fin de alcanzar el objetivo de perder peso y/o mantenerse en forma.

El desarrollo de herramientas desintoxicantes ha dado paso a la creación del traje por presión de aire, como una auténtica novedad. De conformidad con el programa de control de la tecnología digital, el traje por presión de aire (incluyendo brazos, piernas y cintura) cuenta con 20 airbags repartidos en diversas partes del cuerpo para drenar, masajear, contraer y presionar de distintas formas, intensidades y posiciones. Es muy sencillo de utilizar y funciona como un leve masaje mecánico. A partir de ahora, usted no necesitará realizar ejercicios complejos y dolorosos para mantenerse en forma y saludable. Puede disfrutar de maravillosos tratamientos de salud en cualquier momento y en cualquier lugar, como si contara con un masajista profesional. La sensación es increíble.

Los expertos recomiendan tratamientos semanales durante al menos 2 meses, para lograr los resultados deseados.

BENEFICIOS DEL DRENAJE LINFÁTICO

El drenaje linfático ofrece muchos beneficios y cada uno de ellos depende de la zona a la que afecte. De este modo, según la zona descubrimos que los beneficios son:

A nivel circulatorio: El masaje puede mejorar la circulación de la sangre porque el oxígeno del cuerpo cada vez es mayor. Ayuda a eliminar los residuos metabólicos y puede ser beneficioso en la disminución de la presión arterial.

A nivel linfático: El masaje puede ayudar a aumentar la circulación de la linfa, ayuda en la eliminación de desechos metabólicos y estimula el sistema inmunológico.

A nivel muscular: El masaje estimula y tonifica los músculos y articulaciones y refuerza los tejidos conectivos. Ayuda en la relajación, alivia la fatiga y proporciona alivio en los espasmos musculares.

El masaje estimula los puntos nerviosos motores, alivia el estrés y la tensión, y promueve la sensación de bienestar.

Tonifica la piel: El masaje incrementa el suministro de sangre a la piel nutriendo los tejidos y facilitando así la regeneración celular.

La presoterapia es un tratamiento médico y estético cuyo objetivo es realizar un drenaje linfático mediante la utilización de la presión del aire sobre diferentes partes del cuerpo. Gracias a la compresión y descompresión de manera alterna se actúa de modo muy eficaz sobre el sistema linfático.

A nivel deportivo: Ayuda a reducir la fatiga muscular y acelerar la recuperación facilitando el drenaje de las sustancias tóxicas acumuladas después de una sesión de entrenamiento especialmente intenso.

*El sentido del masaje siempre debe ser ascendente, de abajo a arriba.

FUNCIONES

- 1) Mejora la circulación del sistema linfático, promueve el flujo de sangre, favorece el drenaje linfático, elimina toxinas y sustancias inútiles del cuerpo.
- 2) Suaviza y separa acumulaciones de grasas, elimina síntomas de exceso de grasas y además, mantiene en forma.
- 3) Elimina la celulitis y evita la formación de varices de forma eficaz.
- 4) Elimina la fatiga, regula la fisiología humana, mejora la prevención y la resistencia a enfermedades, juega un papel importante en la terapia adyuvante para recuperar secuelas causadas por la apoplejía y la hemiplejía.

CARACTERÍSTICAS

- 1) La máquina tiene un funcionamiento muy sencillo, claro y práctico.
- 2) Gran diseño de los airbags. En total, hasta 20 airbags que envuelven el cuerpo, asegurando que se siente la presión en todas las partes del cuerpo.
- 3) Manguitos de presión de aire (para brazos, piernas y cintura) elaborados en un material suave y ligero. Son fáciles de colocar, limpiar y muy resistentes.
- 4) Una potente bomba de aire que insufla rápidamente el aire a los manguitos y proporciona un suave masaje.
- 5) 4 entradas de aire activadas según distintas combinaciones para proporcionar diferentes secuencias de masaje.
- 6) 3 niveles de intensidad para adaptar el masaje a los distintos usuarios.
- 7) Distintas modalidades de masaje y ajustes del ritmo para mayor comodidad.

Programas : (ver imagen a continuación)

La duración de cada programa es de 30 min. Al agotarse el tiempo fijado por defecto, el aparato suspenderá la presión. En cualquier caso, el tiempo establecido irá en función de la intensidad aplicada pero nunca superior a los 30 minutos.

PROGRAMA A: Salud: los airbags se hinchan, mantienen, y deshinchon de manera progresiva, siguiendo un ritmo establecido que le hará sentir un masaje en todas las partes del cuerpo como si fueran las manos de un profesional del masaje. Además, es adecuado para mejorar la circulación linfática, prevenir las varices, eliminar las toxinas, estimular la circulación de la sangre, favorecer la relajación de músculos, articulaciones y aliviar la fatiga.

PROGRAMA B: Belleza: los airbags se hinchan, mantienen y deshinchan igualmente de manera progresiva pero siguiendo una secuencia distinta, haciéndole sentir que hay muchas manos masajeando y presionando. Este funcionamiento fisioterapéutico es apropiado para favorecer el drenaje linfático, eliminar toxinas y aliviar edemas y el exceso de humedad del cuerpo.


PROGRAMA C: Deportes: mientras se realiza la sesión, los airbags se hinchan, mantienen y deshinchan de forma cíclica, haciéndole sentir como la fuerza de la presión aumenta gradualmente. Cuando se desconecta, la circulación de la sangre se recupera rápidamente. Este tratamiento es adecuado para mejorar la circulación de la sangre, quemar el exceso de grasas y eliminar los líquidos acumulados en el cuerpo, reforzando los músculos y recuperando su elasticidad.

Ciclos de presión según los programas



PROGRAMA MASAJE: Relajación. Este programa le ayudará a relajarse, haciendo que músculos y articulaciones descansen. Así mismo, mejorará la circulación en las zonas tratadas, ejerciendo simplemente una ligera presión.

Panel de Control:

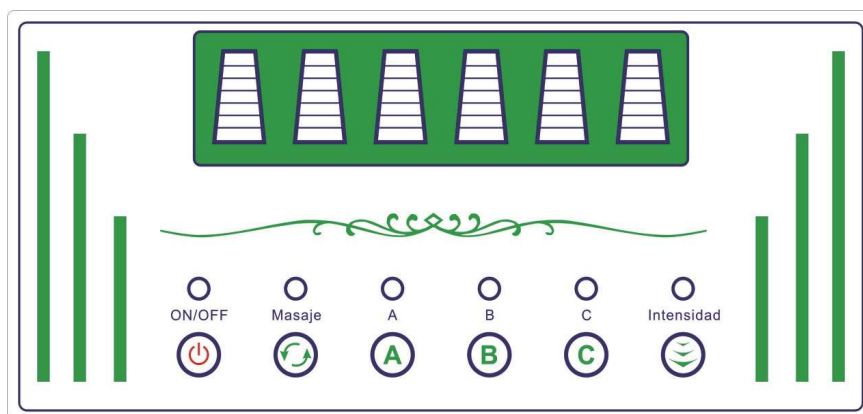

1. Inicio/Pausa (ON/OFF)
2. Programa - MASAJE
3. Programa A SALUD
4. Programa B BELLEZA
5. Programa C DEPORTE
6. Ajuste de la intensidad (INTENSITY)

Existen tres niveles de intensidad para cada programa, incluido el programa de Masaje. Presionando la tecla de “intensity”, pasaremos de intensidad Alta a Media. Presionando de nuevo, pasaremos de Media a Baja. Al volver a presionar sobre la tecla, regresaremos a la intensidad Alta.

NOTA: Identificación de las intensidades :

- La luz parpadea 1 vez, estamos en intensidad BAJA
- La luz parpadea 2 veces, estaremos en intensidad MEDIA
- La luz parpadea 3 veces, estaremos en intensidad ALTA

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación:

1. Conecte el enchufe de la máquina principal a la toma de corriente, la máquina pasa a modo de espera. ❶
2. Fije bien el tubo de aire a cada conector del masajeador (brazos, piernas o cintura) e inserte la clavija del tubo en la máquina principal. ❷
3. Colóquese las prendas seleccionadas. Gracias al accesorio del conector DUAL, Vd podrá conectar simultáneamente dos zonas de su cuerpo (brazos y cintura o piernas y cintura). ❸
Asímismo, dispone de unos extensores de piernas que le permitirán ajustar mejor el juego de perneras al ancho de sus piernas. ❹




Funcionamiento:

1. Pulse el botón POWER situado en la parte posterior de la máquina, la luz indicadora se encenderá.
2. Presione la tecla ON / OFF para que la máquina comience a funcionar.
3. Seleccione el programa deseado ---- Masaje, A , B o C
4. Presione la tecla INTENSITY para conseguir la intensidad deseada
5. En caso de que desee realizar una pausa durante la sesión para aplicar alguna crema, presione la tecla ON/OFF y luego vuelva a pulsar la tecla ON/OFF para retomar la sesión.
6. Presione la tecla ON / OFF para detener definitivamente el programa.

Las sesiones tienen un tiempo predeterminado de 30 minutos. Transcurrido ese tiempo, la máquina se apagará automáticamente emitiendo 3 sonidos.

MONITOR Y ELEMENTOS PERIFÉRICOS

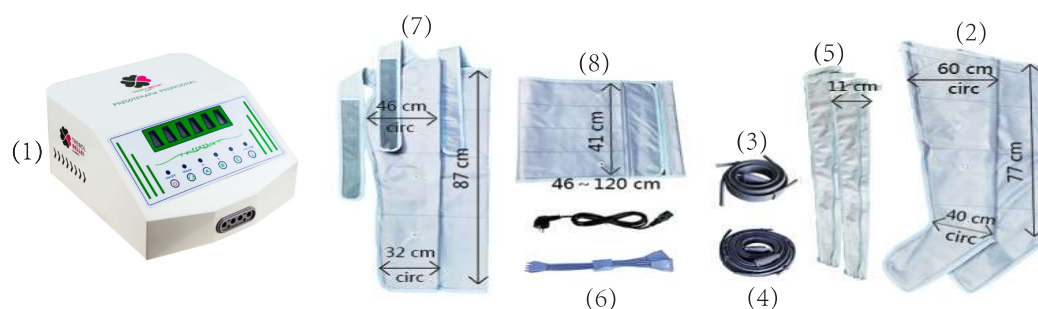

1. Monitor
2. Juego de perneras (pierna derecha con las conexiones en el lado derecho, pierna izquierda con las conexiones en el lado izquierdo)
3. Tubo de conexión para la cintura.
4. Tubo de conexión para piernas o brazos.
5. Extensores para las piernas
6. Conector dual para conectar 2 partes al mismo tiempo (brazos/cintura o piernas/cintura)
7. Juego de brazos
8. Cintura

IMPORTANTE: “Las clavijas de conexión siempre deben de estar colocadas de modo que el masaje sea ascendente, de abajo hacia arriba. Si el masaje no sigue esa progresión tiene que girar la conexión o conexiones al revés para que el masaje sea de modo ascendente.”

ACCESORIOS	MEDIDAS EXTERNAS	MEDIDAS ÚTILES
Largo pierna	77 cm	76 cm
Ancho muslo	60 cm	58cm
Ancho tobillo	40 cm	38cm
Ancho extensor pierna	11 cm	10 cm
Largo brazo	87 cm	86 cm
Ancho brazo	46 cm	44 cm
Ancho muñeca	32 cm	30 cm
Largo cintura	127 cm	46-120 cm
Ancho cintura	41 cm	41 cm

Consejos prácticos:

1. Recomendamos tomar un vaso de agua antes y otro después de cada sesión, con el fin de facilitar la eliminación de toxinas y grasa a través de la orina.
2. Masajear el cuerpo con productos reafirmantes (gel o aceite) para obtener mejores resultados.
3. La intensidad irá en función de la sensación del usuario.
4. Esterilizar las prendas con alcohol al 50%.

Advertencias :

- Los usuarios con inflamación aguda, infección o sangrado, y que padezcan algún tumor, cardiopatía, enfermedades crónicas o con marcapasos deberán consultar con su médico antes de iniciar el tratamiento.
- Interrumpir inmediatamente la sesión si se siente mal durante la misma.
- Recomendamos utilizar el producto no más de 30 minutos en cada sesión.
- Recomendamos trabajar con un solo brazo a la vez para no ejercer demasiada presión sobre la circulación de retorno hacia el corazón, desde ambos brazos simultáneamente.
- Dejar descansar el equipo durante unos 15 min antes de iniciar otra sesión para dar tiempo a que los airbags se deshinchén y las prendas vuelvan a su sitio.
- 30 minutos entre sesión y sesión.
- Evitar golpes e impactos con objetos punzantes.
- No dejar que el equipo se sobrecaliente en exceso, ni que le caiga líquido encima.
- Utilizar el enchufe y la fuente de alimentación correctos.
- No conectar el equipo a una toma de corriente que no tenga toma de tierra, esté dañada o deteriorada.
- Desenchufar la máquina después de su utilización.
- No retorcer, ni doblar los tubos de aire cuando estén en funcionamiento.
- No desechar este producto. Llevarlo a un punto de reciclaje.
- No colocar la máquina directamente bajo la luz del sol o cerca de una fuente de calor como estufas, etc....
- Utilizar un paño húmedo y suave para limpiar la máquina. Nunca usar productos químicos, detergentes o abrasivos.

Estándar Técnico:

Marca		Artículo	HTB-800
Nombre	Máquina de Presión de Aire	Potencia	80W
Bomba de aire:	Producción 50L/min	Presión:	100-200 mmHg
Voltaje	<input type="checkbox"/> 220-240V	Frecuencia	<input type="checkbox"/> 50 Hz
N.W.	7 KG	G.W.	8 KG
Certificados	 		

RECICLAJE



Los materiales de desecho de productos eléctricos no deben echarse al contenedor de basura junto con el resto de desperdicios del hogar. Estos materiales deben devolverse a la tienda donde se adquirieron o bien llevarlos a un punto específico para su reciclaje o eliminación. Según la normativa de la 2002/96/EC.

Estimado Cliente, ante cualquier duda relacionada con este artículo, puede ponerse en contacto con nuestro SAT. Estaremos encantados de poder ayudarle.

jrd@joalsl.com

En los siguientes casos la garantía no se hará efectiva:

- a. Cualquier daño resultado de cualquier reparación o manipulación no autorizada por la compañía.
- b. Cualquier daño resultado de un mal uso, negligencia o accidente.
- c. Cualquier daño causado por desastres naturales o voltaje anormal.
- d. Cualquier daño resultado de casos de usos de la máquina en otros contextos que no sea el descrito en este manual.