

01 Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den esaflosser One entschieden hast. Dieses Gerät unterstützt dich bei der täglichen Interdentalpflege – für ein spürbar sauberes Mundgefühl und gesunde Zahnzwischenräume. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch und bewahre sie gut auf.


Hast du Fragen oder Anregungen? Schreib uns an support@esavea.com. Unser Team versucht so schnell wie möglich zu antworten.

Wir freuen uns über deine Bewertung. Sie hilft uns sehr, uns kontinuierlich zu verbessern.




02 Lieferumfang

Bitte überprüfe vor der ersten Anwendung, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

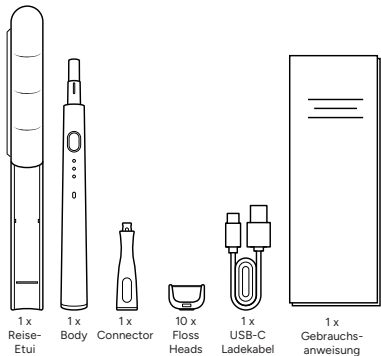

03 Bedienung


Der esaflosser merkt sich die zuletzt verwendete Intensitätsstufe und verfügt über einen integrierten 2-Minuten-Timer. Nach Ablauf der Zeit schaltet sich das Gerät automatisch ab. Wähle den Modus, der am besten zu dir passt:

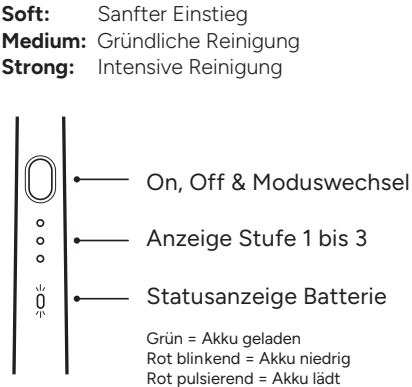

04 Akku vollständig Laden


Lade das Gerät vor der ersten Anwendung vollständig auf und verwende nur das mitgelieferte USB-C-Ladekabel. Das verlängert die Lebensdauer.

Öffne dazu die Kappe am unteren Ende, stecke das USB-C-Kabel ein, verbinde es mit einem handelsüblichen 5 V-Ladegerät und stecke dieses in eine Steckdose. Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden. Bei einmaliger täglicher Nutzung beträgt die Akkulaufzeit bis zu 60 Tage.

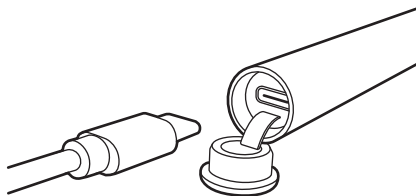


5 Vorbereitung

Klicke den Floss Head auf den Connector – achte dabei auf die richtige Ausrichtung. Er muss formschlüssig einrasten. Prüfe anschließend, ob der Connector korrekt mit dem Body verbunden ist. Eine kleine Lücke ist normal und notwendig für optimale Vibrationsübertragung.

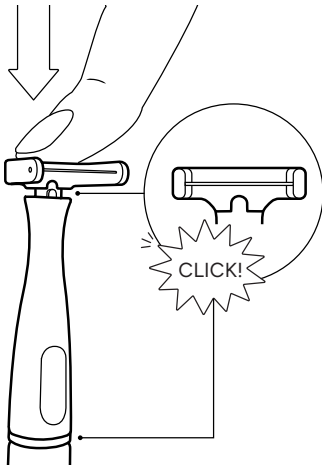

Spüle den Floss Head vor der Anwendung kurz unter fließendem Wasser ab. Auch während der Nutzung empfiehlt es sich, die Zahnseide bei sichtbarer Verschmutzung zwischendurch zu reinigen. Nach der Anwendung erneut kurz abspülen.

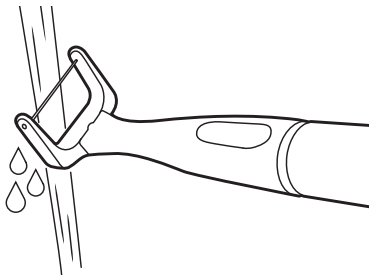


06 Anwendung

Lege deinen Daumen in die Griffmulde – so führst du den esaflosser präzise durch alle Zahnzwischenräume. Besuche unsere Website esavea.de oder [@esavea.official](https://www.instagram.com/esavea.official) auf Social Media für eine anschauliche Videoanleitung.




Video-Anleitung

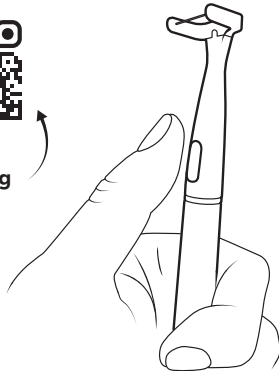

Führe die Zahnseide sanft in den Zahnzwischenraum ein. Beiß dabei leicht mit Zähnen oder Lippe auf das Bite Pad – so gleitet die Zahnseide mühelos zwischen die Zähne. Lege zum Herausnehmen den Floss Head an die gegenüberliegenden Zähne an und öffne langsam den Kiefer. So gleitet die Zahnseide wieder kontrolliert und sicher heraus.




Befindet sich die Zahnseide zwischen den Zähnen, bewege sie langsam und mit leichtem Druck entlang der Seitenflächen, um Plaque und Speisereste zu entfernen. Wechsle anschließend zum nächsten Zahnzwischenraum.

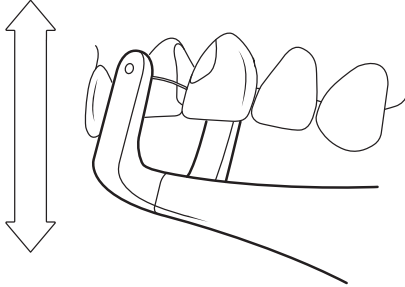

07 Wechseln der Floss Heads

Bei täglicher Anwendung solltest du den Floss Head spätestens nach 7 Tagen austauschen. Ersetze ihn früher, wenn er verschmutzt, ausgefranst oder beschädigt ist.

Zum Entfernen greifst du den Floss Head mit drei Fingern und ziehst ihn vorsichtig vom Connector ab. Setze anschließend einen neuen Floss Head wie in Punkt 05 beschrieben auf. Einfach aufklicken, bis er sicher einrastet.

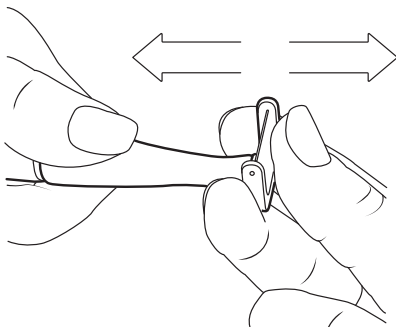

08 Tipps für die Anwendung

Beginne sanft: Starte mit dem „Soft“-Modus, besonders wenn du elektrische Zahnseide zum ersten Mal verwendest oder empfindliches Zahnfleisch hast.

Am Anfang kann es zu leichtem Zahnfleischbluten kommen. Das ist nicht ungewöhnlich und ein Hinweis darauf, dass die Interdentalhygiene verbessert werden muss. In der Regel klingt es nach etwa einer Woche täglicher Anwendung ab. Sollten die Beschwerden anhalten, konsultiere bitte deinen Zahnarzt.

Auch ein leichtes Kitzeln am Zahnfleisch oder in der Handfläche durch die Vibration ist ganz normal. Wie bei einer elektrischen Zahnbürste gewöhnt sich dein Körper schon bald daran.

Mit der Zeit wird die Zahnseide durch den Gebrauch dünner – so gleitet diese noch leichter in enge Zwischenräume.

Achte darauf, alle Zahnzwischenräume zu reinigen. Auch die Flächen hinter den letzten Backenzähnen.

09 Pflegehinweise

Damit dein esaflosser lange hygienisch, sicher und zuverlässig funktioniert, beachte bitte folgende Hinweise:

Spüle den Floss Head direkt nach der Anwendung gründlich unter fließendem Wasser ab. Entferne dabei alle Rückstände. Wische den Griff regelmäßig mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab. Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, keine Scheuermittel und keine alkoholhaltigen Flüssigkeiten.

Das Gerät und die Floss Heads sind nicht für die Reinigung in der Spülmaschine oder für die Desinfektion in heißem Wasser geeignet.

Kontrolliere den Floss Head und Connector regelmäßig auf Risse oder Abnutzung. Bei sichtbaren Schäden nicht weiterverwenden – es besteht Verletzungs- und Erstickungsgefahr.

Wenn du Zahnpasta mit Peroxid, Natron oder ähnlichen Inhaltsstoffen verwendest, spüle den Floss Head und Griff besonders gründlich mit Wasser ab. Diese Stoffe können das Material angreifen und zu Rissen führen.

Lasse alle Teile an der Luft trocknen, bevor du sie im Reiseetui verstaust oder das Gerät auflädst.

Verwende beim Transport stets das mitgelieferte Reiseetui, um das Gerät vor Stößen, Schmutz und anderen Umwelteinflüssen zu schützen.

10 Sicherheitshinweise

Bitte vor dem ersten Gebrauch vollständig lesen, aufbewahren und an nachfolgende Nutzer weitergeben. Eine Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

Bedeutung der Signalwörter

GEFAHR – Unmittelbare Gefahr, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.
WARNUNG – Mögliche Gefahr, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT – Mögliche Gefahr, die zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.
HINWEIS – Sachschaden oder nützliche Zusatzinformation.

10.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ein elektrisches Mundpflegegerät („elektronische Zahnseide“) zur kosmetischen Reinigung von Zähnen, Zahnfleisch und Zunge im privaten Haushalt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

10.2 Nutzerkreis & Aufsicht

Kinder ab 10 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Gerät nur unter Aufsicht bzw. nach Einweisung verwenden und müssen die Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen – Erstickungsgefahr durch kleine Teile. Reinigung und Wartung dürfen nur unter Aufsicht erfolgen. Aufsätze sind Hygieneartikel und dürfen nicht zwischen Personen geteilt werden (Infektionsgefahr).

10.3 Medizinische Kontraindikationen

Konsultieren Sie vor der ersten Verwendung Ihren Zahnarzt/Arzt, wenn Sie 1. Zahnfleischerkrankungen oder starkes Zahnfleischbluten haben, 2. Blutgerinnungsstörungen, einen Herzschrittmacher oder andere Implantate tragen, 3. sich in den letzten 2 Monaten einer Zahn- oder Zahnfleischoperation unterzogen haben. WARNUNG: Beenden Sie die Anwendung und suchen Sie umgehend einen Zahnarzt/Arzt auf, wenn während oder nach der Anwendung Blutungen, Schmerzen oder Unwohlsein auftreten.

10.4 Elektrische Sicherheit & Einsatz im Nassbereich

Nur das mitgelieferte 5 V (DC) 1 A USB-C-Kabel in Kombination mit einem ordnungsgemäßen Netzteil an einer vorschriftsmäßigen, leicht zugänglichen Steckdose verwenden. Das USB-C-Kabel ist nicht spritzwassergeschützt – nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen oder gefüllten Waschbecken verwenden. WARNUNG – Gerät während des Ladevorgangs nicht verwenden oder in Wassernähe ablegen. Vor Reinigung, Montage oder Demontage USB-Stecker ziehen. Handstück niemals vollständig unter Wasser tauchen; Ladebuchse während der Reinigung abdecken.

10.5 Akkusicherheit (Li-Ion)

Laden Sie nur mit dem Original-Zubehör bei 0 °C – 40 °C. Überwachen Sie den Ladevorgang. Akku ist nicht entnehmbar. Gerät nicht öffnen oder verändern. Keiner starken Hitze (> 60 °C), Flammen oder direktem Sonnenlicht aussetzen. Kurzschluss, Quetschen oder Durchstechen kann Brand/Explosion verursachen. Gerät gemäß WEEE-Richtlinie an einer Sammelstelle entsorgen.

Batteriedaten

Chemisches System: Li-Ion
Nennkapazität: 320 mAh / 1.184 Wh
Entsorgung: Getrennte Sammlung

10.6 Gebrauch & Pflege

Nur Original-Aufsätze verwenden und spätestens alle 7 Tage wechseln. Nach jeder Verwendung Handstück & Aufsatz unter fließendem Wasser reinigen. Gerät trocken lagern; für Transport das mitgelieferte Reiseetui verwenden. Keine aggressiven Reinigungsmittel, chemischen Lösungsmittel oder scharfe Werkzeuge nutzen.

10.7 Verbots- & Warnhinweise

Nicht im Freien, in explosionsgefährdeter Atmosphäre oder in Bereichen mit medizinischer Sauerstoffbehandlung nutzen. Aufsatz nicht auf Augen, Ohren oder offene Wunden richten. Gerät nicht modifizieren; Reparaturen nur durch autorisiertes Fachpersonal.

10.8 Konformität & Entsorgung

Dieses Produkt erfüllt u. a. folgende EU-Rechtsakte: -Verordnung (EU) 2023/988 (General Product Safety Regulation) - Richtlinie 2014/30/EU (EMV) - Richtlinie 2011/65/EU i. d. F. 2015/863/EU (RoHS) - Verordnung (EU) 2023/1542 (Batterien) - Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Technische Daten

Nennspannung: 5 V (DC) 1A
Leistungsaufnahme: < 5 W
Schutzklasse: III
IP-Schutzart: IPX7
Akku-Kapazität: 320 mAh / 1,184 Wh
Materialien: ABS, PP, UHMWPE
Modell-/Chargennummer: EF-01

Bitte recyceln Sie Karton und Kunststoffverpackung gemäß den örtlichen Vorschriften. Dieses Gerät, seine Elektronik- und Batterieteile dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Führen Sie Altgeräte und Altbatterien der getrennten Sammlung zu.

WEEE-Reg.-Nr. DE 36947998

EU-Konformitätserklärung:
www.esavea.de/support/doc

11 Garantie & Gewährleistung

Diese Gebrauchsanweisung lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nach §§ 437 ff. BGB (24 Monate ab Übergabe) unberührt.

Herstellergarantie (freiwillig)

Dauer: 24 Monate ab Kaufdatum auf das Gerät; 24 Monate auf den Akku, davon 6 Monate auf Erhaltung von ≥ 70 % der Nennkapazität.

Umfang: Beseitigung von Herstellungs- und Materialfehlern durch Reparatur oder Ersatz nach Wahl des Herstellers.

Nicht abgedeckt: Verbrauchsteile (Floss Heads und Connectoren) – als Hygieneartikel vom Umtausch ausgeschlossen, sobald ihre Versiegelung / Einzelpackung geöffnet wurde (vgl. § 312g Abs. 2 Nr. 3 BGB) –, normale Abnutzung, Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Nichtbeachtung dieser Anleitung, Änderungen oder Reparaturversuche durch Dritte, Unfall, Sturz, Feuchtigkeit, chemische, thermische oder elektrische Einflüsse außerhalb der Spezifikation.

Geltendmachung: Bitte zuerst an Ihren Händler wenden; alternativ an den Hersteller unter Vorlage des Kaufbelegs. Versand- und Bearbeitungskosten können im Garantiefall anteilig berechnet werden.

Territoriale Geltung: EU-, EWR-Staaten und Schweiz.

Haftungsbeschränkung Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Ersatz mittelbarer oder Folgeschäden, sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschlossen.

(Stand: 08/25 | Druck- und Satzfehler vorbehalten)

12 Hersteller

esavea GmbH
Otto-Heilmann-Str. 17
82031 Grünwald

Kontakt: support@esavea.de

