



VULPES GOODS
BABYCARE

ELECTRIC NASAL ASPIRATOR

**MANUAL • ANLEITUNG
HANDLEIDING • MANUEL
MANUAL • MANUALE • MANUAL**

WWW.VULPESGOODS.COM

ENGLISH	4
The Device	5
User Guide	8
Characteristics and Application	9
Product parameters	12
DEUTSCH	13
Das Gerät	14
Benutzerhandbuc	17
Eigenschaften und Anwendung	18
Produkt parameter	21
NEDERLANDS	22
Het apparaat	23
Gebruiksaanwijzing	26
Kenmerken en Toepassingen	27
Product Parameters	30
FRANCAIS	31
Le dispositif	32
Manuel de l'utilisateur	35
Caractéristiques et applications	36
Paramètres du produit	39

ESPAÑOL **40**

El Dispositivo	41
Guía del Usuario	44
Características y Aplicación	45
Parámetros del Producto	48

ITALIANO **49**

Il dispositivo	50
Guida dell'utente	53
Caratteristiche e Applicazione	54
Parametri del Prodotto	57

PORTUGUÊS **58**

O Dispositivo	59
Guia do Usuário	62
Características e Aplicação	63
Parâmetros do Produto	66

ENGLISH

THE DEVICE

Suction head

Collection cup

Led Screen

On/Off button

Gear button

Light button

Music button



Suction head

You can use the 3 different attachments for different blockages. For example, deep mucus, shallow mucus and hard pieces.

Collection cup

The collection tray collects all residues. Clean the collection tray on time. The nasal cleaner will not work without a collection tray.

Led screen

Use the LED screen to read the mode and battery status.

On/Off button

Press once to turn the electric nasal aspirator on, then press again to turn it off.

Gear button

Pressing the button selects one of the five available suction levels. Each click increases the suction power. After suction level 5, the suction level goes back to 1.

Light button

Press the light button once to turn on the light and illuminate the nasal cavity. Press again to turn it off.

Music button

If you press the music button, 3 different songs can be played. Each time you press the button, the song changes. After the third song, it will go back to mute.

USER GUIDE

Before using the nasal cleaner for the first time, it is important to make sure the cleaner is fully charged for optimal performance.

1. Place the collection cup on the nasal cleaner and choose the appropriate attachment
2. Press the power button to activate the nasal cleaner and choose the desired suction strength.
3. For an optimal experience, you can use the music button and choose from 3 different children's songs.
4. For an even better experience, you can also use the light button. This is also possible while using the music button.
5. After using the nasal cleaner, clean the used attachments and collection cup with lukewarm water.

CHARACTERISTICS AND APPLICATION

- Do not expose this product to high temperature, high humidity or direct sunlight for a long time.
- Prevent the occurrence of intense pressure collisions or accidental drops of this product.
- This product is only suitable for absorbing nasal secretions. Do not use it for improper use, such as absorbing water or skin.
- When the suction is significantly reduced or the motor sound is significantly reduced, please charge it in time.
- When using this product, make sure the user does not hold their breath or swallow saliva. Keep the mouth open to avoid pressure differences in the ear.
- In Case of any pain or discomfort during use. Stop immediately, and seek medical attention!
- Avoid inserting the suction head into the nasal cavity with excessive pressure.

- Clean the suction head before each use and keep it clean.
- Adults must adhere to the operating instructions when using it, and it is prohibited for children to operate it independently. Ensure the product is stored in a location inaccessible to children.
- Not possible to put your own music on the product.
- Do not put product in dishwasher and do not submerge in water or liquid.

- Some weak slime can flow back (If you are able to clear the suction port of the main engine using a cotton swab).



- Utilize this product in the correct posture/ a method to prevent liquid from being drawn into the main device.



PRODUCT PARAMETERS

Product Name:	Electric nasal aspirator
Model:	VG-UB-007
Battery:	450MA
Input Voltage:	5V
Input Power:	5W-1A

DEUTSCH

DAS GERÄT

Anlage

Sammelbecher

Led-Schirm

Einschalttaste

Schaltknopf

Licht-Taste

Taste Musik



Anlage

Sie können die 3 verschiedenen Aufsätze für unterschiedliche Verstopfungen verwenden. Zum Beispiel für tiefen Schleim, flachen Schleim und harte Stücke.

Sammelbecher

Die Auffangschale fängt alle Rückstände auf. Reinigen Sie die Auffangschale rechtzeitig. Der Nasenreiniger funktioniert nicht ohne Auffangschale.

Led-Schirm

Auf der Led-Schirm können Sie die Saugstärke und den Batteriestatus ablesen.

Einschalttaste

Drücken Sie einmal, um den elektrischen Nasenreiniger einzuschalten und drücken Sie erneut, um ihn auszuschalten.

Schaltnauf

Durch Drücken der Taste wird eine der fünf verfügbaren Saugstufen ausgewählt. Jeder Klick erhöht die Saugleistung.

Licht-Taste

Drücken Sie die Lichttaste einmal, um das Licht einzuschalten. Drücken Sie erneut, um es auszuschalten.

Taste Musik

Durch Drücken der Musiktaste können 3 verschiedene Titel abgespielt werden. Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, wechselt der Titel. Nach dem dritten Lied wird der Ton wieder stummgeschaltet.

BENUTZERHANDBUC

Bevor Sie den Nasenreiniger zum ersten Mal benutzen, sollten Sie sicherstellen, dass er vollständig aufgeladen ist, um eine optimale Leistung zu erzielen.

1. Setzen Sie den Auffangbehälter auf den Nasenreiniger und wählen Sie den richtigen Aufsatz.
2. Drücken Sie die Einschalttaste, um den Nasensauger zu aktivieren, und wählen Sie die gewünschte Saugstärke.
3. Für ein optimales Erlebnis können Sie die Musiktaste verwenden und aus 3 verschiedenen Kinderliedern wählen.
4. Für ein noch besseres Erlebnis können Sie auch die Lichttaste verwenden. Dies ist auch bei Verwendung der Musiktaste möglich.
5. Reinigen Sie nach der Verwendung des Nasenreinigers die verwendeten Aufsätze und den Auffangbehälter mit lauwarmem Wasser.

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG


- Setzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie Zusammenstöße mit hohem Druck oder versehentliches Fallenlassen dieses Produkts.
- Dieses Produkt ist nur für die Absorption von Nasensekreten geeignet. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke, z. B. zum Aufsaugen von Wasser oder Haut.
- Wenn die Saugleistung stark nachlässt oder das Motorgeräusch stark abnimmt, laden Sie es rechtzeitig auf.
- Achten Sie bei der Verwendung dieses Produkts darauf, dass der Benutzer nicht den Atem anhält oder Speichel schluckt. Halten Sie den Mund offen, um Druckunterschiede im Ohr zu vermeiden.
- Bei Schmerzen während der Anwendung. Sofort aufhören und einen Arzt aufsuchen!
- Führen Sie den Saugkopf nicht mit zu viel Druck in die Nasenhöhle ein.

- Reinigen Sie den Saugkopf vor jedem Gebrauch und halten Sie ihn sauber.
- Wachsene müssen bei der Benutzung des Produkts die Gebrauchsanweisung beachten, und Kindern ist es untersagt, das Produkt selbstständig zu bedienen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt an einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahrt wird.
- Es ist nicht möglich, Ihre eigene Musik auf das Produkt zu legen.
- Geben Sie das Produkt nicht in die Spülmaschine und tauchen Sie es nicht in Wasser oder Flüssigkeiten.

- Etwas schwacher Schleim kann zurückfließen (wenn Sie den Kopfmotoraufsatz mit einem Wattestäbchen reinigen können)



- Benutzen Sie dieses Produkt in der richtigen Haltung/Methode, um zu vermeiden, dass Flüssigkeit in die Kopfeinheit gesaugt wird.

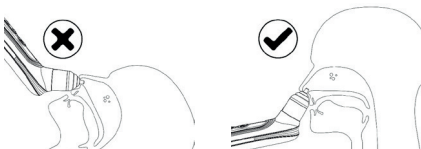

PRODUKT PARAMETER

Produktname:	Elektrischer Neureiniger
Modell:	VG-UB-007
Batterie:	450mAh
Eingangsspannung:	5V
Eingangsleistung:	5W-1A

NEDERLANDS

HET APPARAAT

Opzetstuk

Opvang cup

Led Scherm

Aan/uit-knop

Versnellingsknop

Lichtknop

Muzieknop



Opzetstuk

Je kunt de 3 verschillende opzetstukken gebruiken voor verschillende verstoppingen. Bijvoorbeeld diep slijm, ondiep slijm en harde stukjes.

Opvang cup

De opvangbak vangt alle resten op. Reinig de opvangbak op tijd. De neusreiniger werkt niet zonder opvangbak.

Led scherm

Gebruik het LED-scherm om de zuigsterkte en batterijstatus af te lezen.

Aan/uit-knop

Druk één keer om de elektrische neusreiniger aan te zetten en druk nogmaals om hem uit te zetten.

Versnellingsknop

Door op de knop te drukken selecteer je een van de vijf beschikbare zuigniveaus. Elke klik verhoogt de zuigkracht.

Lichtknop

Druk één keer op de lichtknop om het licht aan te zetten. Druk nogmaals om het uit te schakelen.

Muzieknop

Als je op de muzieknop drukt, kunnen er 3 verschillende nummers worden afgespeeld. Elke keer dat je op de knop drukt, verandert het nummer. Na het derde nummer wordt het geluid weer gedempt.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor het eerste gebruik van de neusreiniger is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de reiniger volledig is opgeladen voor optimale prestaties.

1. Plaats de opvangcup op de neusreiniger en kies het juiste opzetstuk.
2. Druk op de aanknop om de neusreiniger te activeren en kies de gewenste zuigkrachtsterkte.
3. Voor een optimale ervaring kun je gebruikmaken van de muzieknop en kiezen uit 3 verschillende kinderliedjes.
4. Voor een nog betere ervaring kun je ook de lichtknop gebruiken. Dit is ook mogelijk tijdens het gebruik van de muzieknop.
5. Na het gebruik van de neusreiniger dien je de gebruikte opzetstukken en opvangcup schoon te maken met lauw water.

KENMERKEN EN TOEPASSINGEN

- Stel dit product niet langdurig bloot aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid of direct zonlicht.
- Voorkom botsingen onder hoge druk of het per ongeluk laten vallen van dit product.
- Dit product is alleen geschikt voor het absorberen van neussecreties. Gebruik het niet voor ander gebruik, zoals het absorberen van water of huid.
- Als de zuigkracht sterk verminderd is of het motorgeluid sterk verminderd is, laad het dan op tijd op.
- Let er bij het gebruik van dit product op dat de gebruiker zijn adem niet inhoudt en geen speeksel inslikt. Houd de mond open om drukverschillen in het oor te voorkomen.
- Bij pijn of ongemak tijdens gebruik. Stop onmiddellijk en zoek medische hulp!
- Steek de afzuigkop niet met te veel druk in de neusholte.

- Reinig de zuigkop voor elk gebruik en houd hem schoon.
- Volwassenen moeten zich houden aan de handleiding wanneer ze het product gebruiken en het is verboden voor kinderen om het product zelfstandig te bedienen. Zorg ervoor dat het product wordt opgeborgen op een plaats die ontoegankelijk is voor kinderen.
- Het is niet mogelijk om je eigen muziek op het product te zetten.
- Plaats het product niet in de vaatwasser en dompel het niet onder in water of vloeistof.

- Er kan wat zwak slijm terugstromen (als je het opzetstuk van de hoofdmotor kunt schoonmaken met een wattenstaafje)



- Gebruik dit product in de juiste houding/methode om te voorkomen dat er vloeistof in het hoofdapparaat wordt gezogen.



PRODUCT PARAMETERS

Productnaam:	Elektrische Neusreiniger
Model:	VG-UB-007
Batterij:	450mAh
Ingangsspanning:	5V
Ingangsvermogen:	5W-1A

FRANCAIS

LE DISPOSITIF

Pièce jointe

Gobelet de collecte

Écran LED

Bouton d'alimentation

Bouton de vitesse

Bouton d'éclairage

Bouton Musique



Pièce jointe

Vous pouvez utiliser les 3 différents accessoires pour différents types de blocages. Par exemple, les mucosités profondes, les mucosités peu profondes et les morceaux durs.

Gobelet de collecte

Le bac de collecte recueille tous les résidus. Nettoyez le plateau de collecte à temps. L'appareil de nettoyage nasal ne fonctionne pas sans bac de récupération.

Écran LED

L'affichage LED permet de connaître la puissance d'aspiration et l'état de la batterie.

Bouton d'alimentation

Appuyez une fois pour mettre en marche le nettoyeur nasal électrique et appuyez à nouveau pour l'éteindre.

Bouton de vitesse

Une pression sur le bouton permet de sélectionner l'un des cinq niveaux d'aspiration disponibles. Chaque clic augmente la puissance d'aspiration.

Bouton d'éclairage

Appuyez une fois sur le bouton d'éclairage pour allumer la lumière. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.

Bouton Musique

Une pression sur la touche musique permet de jouer 3 chansons différentes. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la chanson change. Après la troisième chanson, le son est à nouveau coupé.

Pince à épiler

Utilisez la pince à épiler pour rendre votre produit encore plus propre.

Câble de chargement

Utilisez le câble de chargement pour recharger le produit en cas de besoin. N'utilisez que l'adaptateur approprié lors de la recharge.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Avant d'utiliser le nettoyeur nasal pour la première fois, il est important de s'assurer que le nettoyeur est complètement chargé.

1. Placez la coupelle de prélèvement sur l'appareil de nettoyage nasal et choisissez l'embout approprié.
2. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour activer le nettoyeur nasal et choisissez la force d'aspiration souhaitée.
3. Pour une expérience optimale, vous pouvez utiliser le bouton de musique et choisir parmi 3 chansons pour enfants.
4. Pour une expérience encore meilleure, vous pouvez également utiliser le bouton d'éclairage. Cela est également possible en utilisant la touche musique.
5. Après avoir utilisé le nettoyeur nasal, nettoyez les embouts usagés et le gobelet collecteur à l'eau tiède.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Ne pas exposer ce produit à des températures élevées, à une forte humidité ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Évitez les collisions à haute pression ou la chute accidentelle de ce produit.
- Ce produit convient uniquement à l'absorption des sécrétions nasales. Ne l'utilisez pas pour d'autres usages, tels que l'absorption d'eau ou de peau.
- Si la puissance d'aspiration est fortement réduite ou si le bruit du moteur est fortement réduit, rechargez-le à temps.
- Lors de l'utilisation de ce produit, veillez à ce que l'utilisateur ne retienne pas sa respiration et n'avale pas de salive. Gardez la bouche ouverte pour éviter les différences de pression dans l'oreille.
- En cas de douleur ou d'inconfort pendant l'utilisation. Arrêtez immédiatement et consultez un médecin !
- N'insérez pas la tête d'aspiration dans la cavité nasale en exerçant une pression trop forte.

- Nettoyez la tête d'aspiration avant chaque utilisation et maintenez-la propre.
- Les adultes doivent se conformer au manuel lorsqu'ils utilisent le produit et les enfants n'ont pas le droit d'utiliser le produit de manière autonome. Veillez à ce que le produit soit stocké dans un endroit inaccessible aux enfants..
- Il n'est pas possible de mettre sa propre musique sur le produit.
- Ne mettez pas le produit au lave-vaisselle et ne l'immergez pas dans l'eau ou dans un liquide.

- Un peu de mucus faible peut refluer (si vous pouvez nettoyer l'embout du moteur de la tête avec un coton-tige).



- Utilisez ce produit dans une position/ méthode correcte afin d'éviter que du liquide ne soit aspiré dans l'unité principale.



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Nom du produit :	Nettoyeur électrique
Modèle :	VG-UB-007
Batterie :	450mAh
Tension d'entrée :	5V
Puissance d'entrée :	5W-1A

ESPAÑOL

EL DISPOSITIVO

**Accesorio
Recipiente de
recolección**

Pantalla LED

**Botón de
encendido/apagado**

Botón de velocidad

Botón de luz

Botón de música



Accesorio

Puedes usar los 3 accesorios diferentes para distintas obstrucciones, como mucosidad profunda, mucosidad superficial y partículas duras.

Recipiente de recolección

El recipiente recoge todos los restos. Limpia el recipiente a tiempo. El limpiador nasal no funciona sin el recipiente de recolección

Pantalla LED

Usa la pantalla LED para ver la potencia de succión y el estado de la batería.

Botón de encendido/apagado

Presiona una vez para encender el limpiador nasal eléctrico y presiona nuevamente para apagarlo.

Botón de velocidad

Al presionar el botón, puedes seleccionar uno de los cinco niveles de succión disponibles. Cada clic aumenta la potencia de succión.

Botón de luz

Presiona el botón de luz una vez para encender la luz. Presiona de nuevo para apagarla.

Botón de música

Al presionar el botón de música, se reproducen 3 canciones diferentes. Cada vez que presionas el botón, cambia la canción. Después de la tercera canción, el sonido se silencia nuevamente.

GUÍA DEL USUARIO

Antes del primer uso del aspirador nasal, es importante asegurarse de que esté completamente cargado para un rendimiento óptimo.

1. Coloca el depósito en el aspirador nasal y elige el accesorio adecuado.
2. Pulsa el botón de encendido para activar el aspirador nasal y selecciona el nivel de succión deseado.
3. Para una experiencia óptima, utiliza el botón de música y elige entre 3 canciones infantiles diferentes.
4. También puedes usar el botón de luz para una mejor experiencia. Es posible usar la luz junto con la música.
5. Después de usar el aspirador nasal, limpia los accesorios y el depósito con agua tibia.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIÓN

- No expongas este producto a altas temperaturas, humedad o luz solar directa por un período prolongado.
- Evita golpes de alta presión o caídas accidentales de este producto.
- Este producto es solo para absorber secreciones nasales. No lo uses para otros fines, como la absorción de agua o de piel.
- Si la succión se reduce o el sonido del motor disminuye, cárgalo a tiempo.
- Mientras utilices este producto, evita contener la respiración o tragar saliva. Mantén la boca abierta para evitar diferencias de presión en el oído.
- Si sientes dolor o molestias durante el uso, detente de inmediato y busca ayuda médica.
- No introduces el cabezal de succión con demasiada presión en la cavidad nasal.
- Limpia el cabezal de succión antes de cada uso y mantenlo limpio.

- Los adultos deben seguir el manual de usuario al utilizar el producto, y está prohibido que los niños usen el producto solos. Guarda el producto en un lugar inaccesible para los niños.
- No es posible cargar música propia en el producto.
- No pongas el producto en el lavavajillas ni lo sumerjas en agua o líquido.

- Puede ocurrir un leve retorno de mucosidad (si puedes limpiar el accesorio de la unidad principal con un hisopo).



- Usa este producto en la posición y método correctos para evitar que el líquido sea aspirado hacia el dispositivo principal.



PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	Limpiador Nasal Eléctrico
Modelo:	VG-UB-007
Batería:	450mAh
Tensión de entrada:	5V
Potencia de entrada:	5W-1A

ITALIANO

IL DISPOSITIVO

Accessorio

Coppa di raccolta

Schermo LED

**Pulsante di accensione/
spegnimento**

Pulsante di velocità

Pulsante della luce

Pulsante della musica



Accessorio

Puoi usare i 3 diversi accessori per diverse ostruzioni, come muco profondo, muco superficiale e particelle dure.

Coppa di raccolta

La coppa raccoglie tutti i residui. Pulisci la coppa di raccolta in tempo. Il pulitore nasale non funziona senza la coppa di raccolta.

Schermo LED

Usa lo schermo LED per leggere la potenza di aspirazione e lo stato della batteria.

Pulsante di accensione/spegnimento

Premi una volta per accendere il pulitore nasale elettrico e premi di nuovo per spegnerlo.

Pulsante di velocità

Premendo il pulsante, puoi selezionare uno dei cinque livelli di aspirazione disponibili. Ogni clic aumenta la potenza di aspirazione.

Pulsante della luce

Premi una volta il pulsante della luce per accendere la luce. Premi di nuovo per spegnerla.

Pulsante della musica

Premendo il pulsante della musica, puoi riprodurre 3 brani diversi. Ogni volta che premi il pulsante, cambia il brano. Dopo il terzo brano, il suono si disattiva nuovamente.

GUIDA DELL'UTENTE

Prima di usare l'aspiratore nasale per la prima volta, assicurati che sia completamente carico per ottenere prestazioni ottimali.

1. Metti il serbatoio sull'aspiratore nasale e scegli l'accessorio giusto.
2. Premi il pulsante di accensione per attivare l'aspiratore nasale e seleziona la potenza di aspirazione desiderata.
3. Per un'esperienza ottimale, usa il pulsante della musica e scegli tra 3 diverse canzoni per bambini.
4. Per un'esperienza migliore, puoi anche utilizzare il pulsante della luce. È possibile usare la luce insieme alla musica.
5. Dopo l'uso, pulisci gli accessori e il serbatoio con acqua tiepida.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONE

- Non esporre questo prodotto a temperature elevate, umidità o luce solare diretta per periodi prolungati.
- Evita urti ad alta pressione o cadute accidentali di questo prodotto.
- Questo prodotto è solo per aspirare secrezioni nasali. Non usarlo per altri scopi, come l'assorbimento di acqua o pelle.
- Se la potenza di aspirazione è notevolmente ridotta o il rumore del motore diminuisce, ricaricalo per tempo.
- Quando usi questo prodotto, evita di trattenere il respiro o di inghiottire saliva. Mantieni la bocca aperta per evitare differenze di pressione nell'orecchio.
- In caso di dolore o fastidio durante l'uso, interrompi immediatamente e consulta un medico.
- Non inserire il beccuccio di aspirazione nella cavità nasale con troppa pressione.

- Pulisci il beccuccio di aspirazione prima di ogni utilizzo e mantienilo pulito.
- Gli adulti devono seguire il manuale d'uso durante l'uso del prodotto, e ai bambini è vietato usare il prodotto da soli. Assicurati che il prodotto sia riposto in un luogo non accessibile ai bambini.
- Non è possibile aggiungere musica personale al prodotto.
- Non mettere il prodotto in lavastoviglie né immergerlo in acqua o altri liquidi.

- Un leggero reflusso di muco potrebbe verificarsi (se riesci a pulire l'accessorio dell'unità principale con un bastoncino di cotone).



- Usa questo prodotto nella posizione/corretta per evitare che il liquido venga risucchiato nell'unità principale.



PARAMETRI DEL PRODOTTO

Nome del prodotto:	Pulitore Naso Elettrico
Modello:	VG-UB-007
Batteria:	450mAh
Tensione di ingresso:	5V
Potenza di ingresso:	5W-1A

PORTUGUÊS

O DISPOSITIVO

Bocal

Copo coletor

Tela de LED

Botão liga/desliga

Botão de velocidade

Botão de luz

Botão de música



Bocal

Você pode usar os 3 bocais diferentes para diferentes obstruções, como muco profundo, muco superficial e partículas duras.

Copo coletor

O copo coletor recolhe todos os resíduos. Limpe o copo coletor a tempo. O limpador nasal não funciona sem o copo coletor.

Tela de LED

Use a tela LED para ler a intensidade da sucção e o nível da bateria..

Botão liga/desliga

Pressione uma vez para ligar o limpador nasal elétrico e pressione novamente para desligá-lo.

Botão de velocidade

Ao pressionar o botão, você pode selecionar um dos cinco níveis de sucção disponíveis. Cada clique aumenta a potência de sucção.

Botão de luz

Pressione o botão de luz uma vez para ligar a luz. Pressione novamente para desligá-la.

Botão de música

Ao pressionar o botão de música, são reproduzidas 3 músicas diferentes. Cada vez que você pressiona o botão, a música muda. Após a terceira música, o som é silenciado novamente.

GUIA DO USUÁRIO

Antes do primeiro uso do aspirador nasal, é importante garantir que ele esteja totalmente carregado para um desempenho ideal.

1. Coloque o reservatório no aspirador nasal e escolha o acessório adequado.
2. Pressione o botão de ligar para ativar o aspirador nasal e selecione o nível de sucção desejado.
3. Para uma experiência ideal, use o botão de música e escolha entre 3 músicas infantis diferentes.
4. Para uma experiência ainda melhor, você também pode usar o botão de luz. É possível usar a luz junto com a música.
5. Após o uso, limpe os acessórios e o reservatório com água morna.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÃO

- Não exponha este produto a altas temperaturas, alta umidade ou luz solar direta por um longo período.
- Evite colisões de alta pressão ou quedas acidentais deste produto.
- Este produto é adequado apenas para absorver secreções nasais. Não use para outros fins, como absorver água ou pele.
- Se a potência de sucção for significativamente reduzida ou o som do motor diminuir, carregue-o a tempo.
- Ao usar este produto, evite prender a respiração ou engolir saliva. Mantenha a boca aberta para evitar diferenças de pressão no ouvido.
- Se houver dor ou desconforto durante o uso, pare imediatamente e procure ajuda médica.
- Não insira o bocal de sucção na cavidade nasal com muita pressão.
- Limpe o bocal de sucção antes de cada uso e mantenha-o limpo.

- Os adultos devem seguir o manual ao usar o produto e as crianças não podem usá-lo sozinhas. Guarde o produto em um local inacessível para crianças.
- Não é possível colocar música própria no produto.
- Não coloque o produto na máquina de lavar louça nem o mergulhe em água ou líquido.

- Pode haver um leve refluxo de muco (se você puder limpar o acessório da unidade principal com um cotonete).



- Use este produto na posição/método corretos para evitar que o líquido seja sugado para a unidade principal.



PARÂMETROS DO PRODUTO

Nome do produto:	Limpador Nasal Elétrico
Modelo:	VG-UB-007
Bateria:	450mAh
Tensão de entrada:	5V
Potência de entrada:	5W-1A



VULPESGOODS



VULPESGOODS_COM



VULPESGOODS_COM